

Elektromobile



Gemeinsam
kommen
Sie weiter

 Life & Mobility



Gemeinsam kommen Sie weiter

Mit einer Freundin einen Einkaufstag genießen? Oder mit einem Freund hinaus in die Natur? Und wie wäre es mit einer Runde durch die Stadt? Mit einem Elektromobil von Life & Mobility müssen Sie nicht nein sagen. Erleben Sie die Freiheit, nehmen Sie weiterhin am Leben teil und tun Sie, worauf Sie Lust haben.

Life & Mobility liegt es am Herzen, dass jeder so lange wie möglich mobil bleiben kann. Das ist die Vision, die uns motiviert! Deshalb arbeiten wir mit Profis zusammen, die alle dasselbe Ziel verfolgen. Denn wir wissen: Gemeinsam kommen Sie weiter. Produktentwickler, die sich beim Thema komfortables Fahren und Verkehrssicherheit auskennen. Aber auch mit Händlern, die verstehen, was Sie brauchen und Ihre Fragen beantworten können. Und darauf sind wir stolz. Genauso, wie auf unsere Elektromobile, die ausnahmslos in den Niederlanden hergestellt werden. Wir garantieren,

dass unsere Elektromobile den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen genügen. Wir arbeiten mit ausgewählten Händlern zusammen, die genau wie wir glauben, dass ein Elektromobil mehr ist als nur ein Fortbewegungsmittel. Es stellt eine Bereicherung Ihres Lebens dar, weil Sie damit mit Familie oder Freunden unterwegs sein können. Gemeinsam mit dem Händler Ihres Vertrauens machen wir Sie mobil und motivieren Sie, mehr aus Ihrem Leben zu machen. **Denn gemeinsam kommen Sie weiter!**





Sie stehen bei uns im Mittelpunkt

Bei Life & Mobility legen wir bei der Entwicklung unserer Elektromobile einen großen Wert darauf, ein positives Gefühl von Freiheit vermitteln zu können. Indem wir mit Ihnen im Gespräch bleiben, können wir die verschiedenen Anforderungen erfüllen, die an ein Elektromobil gestellt werden. Wollen Sie Ihre Einkäufe sicher erledigen oder gemütlich einen Ausflug in die Natur machen? Wir bieten ein großes Sortiment an Elektromobilen, von denen jedes ganz spezifische Vorzüge besitzt. Unsere Händler helfen Ihnen gerne bei der Wahl des richtigen Elektromobils!



Solo: Überlegener Fahrkomfort

Unser Elektromobil der Spitzenklasse mit Premium-Federung für Komfort auf langen Fahrten. Vollständig maßgefertigt nach Ihren Wünschen: Das ist der Solo.

Solo, weiterlesen auf Seite 8 – 9

Solo Blue Diamond, weiterlesen auf Seite 10 – 11

Solo Elegance, weiterlesen auf Seite 10 – 11



15 km/h



65 km



Federungssystem



Presto: souverän unterwegs

Das Presto ist ein sicheres Premium-Elektromobil mit herausragendem Fahrkomfort. Perfekt geeignet für drinnen und draußen. Mit seinem modernen Design und der durchdachten Konstruktion sind Sie souverän unterwegs.

Weiterlesen auf Seite 12 – 13



15 km/h



44 km



Federungssystem



Presto S: noch sportlicher

Ihr Fahrstil ist sportlich und Sie wissen stilvolles Design zu schätzen? Mit verschiedenen Zusatzoptionen wie Gummistoßfängern und seinem einzigartigen Tagesfahrlicht ist der sportliche Presto S eine gute Wahl für Sie.

Weiterlesen auf Seite 14 – 15



15 km/h



44 km



Federungssystem



Vivo: klein aber o-ho

Das Vivo lässt sich mühelos auseinanderbauen und überallhin mitnehmen. Das kleinste Modell in unserem Sortiment ist anspruchlos in der Handhabung und bietet viel Fahrspaß.

Weiterlesen auf Seite 16 – 17



6 km/h



28 km



Federungssystem





Hergestellt in den Niederlanden

Alles begann im Jahr 1952. Dem Jahr, in dem Anton Beumer mit seinem Unternehmen seine ersten Metallrollstühle verkaufte. In den darauf folgenden Jahren trug er drei verschiedene Patente auf seinen Namen ein. Und auch heute noch sind wir innovativ. Heute stellen wir bei Life & Mobility mit der Erfahrung aus 70 Jahren ein vollständiges Sortiment an Mobilitätsprodukten her. Immer wieder befassen wir uns mit der Frage: „Was könnten wir noch verbessern“? Sowohl intern, als auch extern beim Händler oder auch Kunden, werden Marktstudien durchgeführt um unsere Produkte zu verbessern. Dabei haben wir ein klares Ziel vor Augen: dass Sie so lange wie irgend möglich mobil bleiben.



„Genießen Sie jeden sicheren Kilometer“



„Als Produktmanager versetze ich mich gerne in die Rolle eines Elektromobilsfahrers. Gemeinsam mit meinen Kollegen finde ich heraus, was für Sie wichtig ist. Dies ist keine leichte Aufgabe, denn jeder Mensch ist anders. Manche verwenden ein Elektromobil ab und an für einen Ausflug, andere nutzen es für tägliche Erledigungen. Ich habe jedoch gelernt, dass alle Nutzer drei Dinge wichtig finden: Sicherheit, Komfort und Design. Deshalb achten wir auf diese Aspekte selbstverständlich besonders. Denn dadurch haben wir die Gewissheit, dass Sie jeden sicheren Kilometer, den Sie fahren, genießen.“

Chris de Niet
Produktmanager



„Gemeinsam kommen wir wirklich weiter“

„Das allerbeste Elektromobil lässt sich nicht im Alleingang bauen. Unsere Mitarbeiter haben das richtige Wissen und die richtige Erfahrung und unsere sorgfältig ausgewählten Händler wissen genau, was Sie benötigen. Genau wie wir stehen diese Händler zu Ihrer Verfügung, wenn Sie eine Frage haben oder Unterstützung benötigen. Wir liefern nicht nur ein Produkt, sondern vor allem eine Mobilitätslösung, inklusive des Service und der Unterstützung, die erforderlich sind. Auf uns können Sie zählen, gemeinsam kommen wir wirklich weiter!“

Erwin Boersma
Retail Manager

„Meine Arbeit ist wichtig“

„Wenn man älter wird, ist Mobilität nicht mehr so selbstverständlich. Durch die Herstellung von Elektromobilen können wir die Lebensqualität der Menschen nachhaltig verbessern. Ein Elektromobil, das tut, was die Menschen benötigen. Das ist ein tolles Gefühl und auch der Grund dafür, dass ich meine Arbeit wirklich gern tue. Ich montiere ein Elektromobil vollständig selbst und passe es den Wünschen seines Fahrers an. Wenn es fertig ist, prüft mein Kollege noch einmal, ob alles funktioniert. Wenn alles funktioniert, wird es dem neuen Eigentümer übergeben.“



Rik Giezenaar
Mitarbeiter Operations

Solo

Überlegener Fahrkomfort

Lernen Sie den Solo kennen: ein Premium-Elektromobil, das Sie mittels einer großen Auswahl an Optionen und Zubehör umfassend an Ihre Wünsche anpassen können. Das einzigartige, patentierte INDEGO-Federungssystem, das Unebenheiten elegant abfängt, kann wahlweise auf

„sportlich“, „komfortabel“ oder „besonders komfortabel“ eingestellt werden. Dadurch eignet sich der Solo hervorragend für weite Fahrten. Auch für Menschen, die unter Schmerzen leiden, beispielsweise aufgrund von Rückenproblemen oder Rheuma, ist der Solo eine hervorragende Wahl.



INDEGO+
Federungssystem




15 km/h



65 km


 Lieferbare Farben

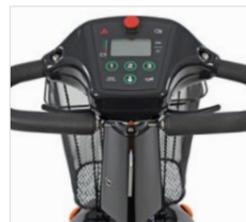

Display mit Not-Halt-Knopf



Gut sichtbare Beleuchtung

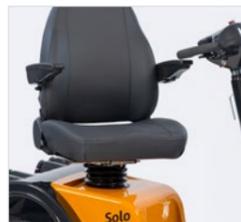

Bequemer Sitz



Daumenbedienung mit Drucktaste (Option)



SDS SAFE DRIVING SOLUTIONS

Sicherheit

- Bei Kurvenfahrten behalten Sie die volle Kontrolle, da die Geschwindigkeit automatisch so angepasst wird, dass Sie sicher unterwegs sind.
- Die Fahrtrichtungsanzeiger lassen sich bedienen, ohne die Hände von der Lenkung zu nehmen. Sie stellen sich nach der Kurve selbsttätig zurück
- Bei einem Notfall können Sie das Elektromobil mit dem gut sichtbaren Not-Halt-Knopf anhalten.
- Die Hinterräder sind einzeln gefedert. Zusammen mit der einzigartigen Radgröße sorgt dies für mehr Stabilität beim Überfahren von Hindernissen.

EDS ERGONOMIC DRIVING SOLUTIONS

Bequem fahren

- Der Sitz, die Bedienung sowie das Steuerungs- und Fahrverhalten können vollständig an individuelle Wünsche und Bedürfnisse angepasst werden.
- Die patentierte Federung INDEGO+ (deren Ansprechverhalten wahlweise auf sportlich, komfortabel oder besonders komfortabel einstellbar ist) und die spezielle Sitzfederung sorgen für das gewünschte Fahrverhalten.
- Zu nachhaltiger Entlastung der Hände können Sie auf der Geraden den Tempomat einschalten.
- Großzügige Bein- und Fußfreiheit dank ergonomischer Formgestaltung.

Eigenschaften

- Einstellbare Geschwindigkeit bis 15 km/h.
- Maximaler Aktionsradius 65 km*.
- Hohe maximale Zuladung von 160 kg (optional 200 kg).
- Höhenverstellbarer, drehbarer und gefederter Sitz.
- Auch erhältlich mit dem besonders leistungsfähigen Forza-Motor für Fahrten auf hügeligen Strecken.

* Unter perfekten Bedingungen



Solo Blue Diamond und Solo Elegance

Die Sonderausführungen unseres Spitzenmodells

Solo Blue Diamond


Lassen Sie Ihr Solo in der Ausführung Blue Diamond strahlen. Die altbekannten Vorzüge des Solo, wie der starke Akku und das besonders hohe Maß an Komfort, in einer einzigartigen blauen Ausführung mit Sitzbezug in „Oak Brown“ und schickem Rautenmuster, Windschutzscheibe und verchromten Spiegeln.

Solo Elegance


Das Solo Elegance ist die stilvollste Ausführung der Produktreihe Solo, mit champagnerfarbigen Verkleidungsteilen und dem gleichen Sitzbezug, Windschutzscheibe und verchromten Spiegeln wie in der Ausführung Blue Diamond.




Gut sichtbare Beleuchtung

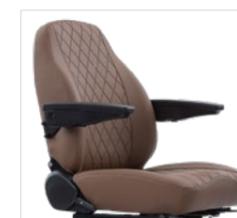

Sitzbezug in Oak Brown

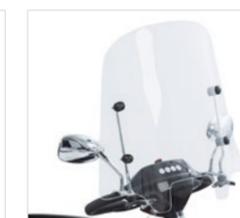

Windschutzscheibe

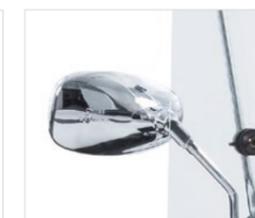

Verchromte Spiegel

Presto

Souverän unterwegs

Sie suchen ein sicheres Premium-Elektromobil mit herausragendem Fahrkomfort durch das einzigartige Federungssystem INDEGO? Dann ist das Presto für Sie genau richtig. Mit seinem kleinen Wendekreis eignet es sich ausgezeichnet für drinnen und draußen. Bei der Konstruktion haben wir allen Sicherheitsaspekten rund um das Fahren mit einem Elektromobil besonders viel

Aufmerksamkeit geschenkt. Durch die LED-Beleuchtung sind Sie beispielsweise im Verkehr besonders gut sichtbar. Mit der übersichtlichen und intelligent gestalteten Bedienkonsole wird die Fahrt zum Kinderspiel. Ob in den Laden oder zu Familie und Freunden. Mit seinem schönen Design und der durchdachten Konstruktion sind Sie souverän unterwegs!



INDEGO
Federungssystem



15 km/h



44 km

● ● ● Lieferbare Farben



Digital-Display



Viel Fußfreiheit



Schwingscheinwerfer



LED-Beleuchtung



SDS SAFE DRIVING SOLUTIONS

Sicherheit

- Damit Sie besser sichtbar sind, haben wir die Fahrtrichtungsanzeiger hoch angesetzt und die Rücklichter so angebracht, dass sie auch von der Seite her sichtbar bleiben.
- Schwingscheinwerfer mit LED-Beleuchtung für bessere Sicht in Kurven.
- Sie können sich ganz auf die Straße konzentrieren, weil die Bedienknöpfe fühlbare Druckpunkte haben und innerhalb der Reichweite des Daumens liegen.
- Bei Kurvenfahrten behalten Sie die volle Kontrolle, da die Geschwindigkeit automatisch so angepasst wird, dass Sie sicher unterwegs sind.
- Die Fahrtrichtungsanzeiger werden nach einer Kurve automatisch zurückgestellt und lassen sich sicher bedienen, ohne die Lenkung loszulassen.

EDS ERGONOMIC DRIVING SOLUTIONS

Bequem fahren

- Das einzigartige Federungssystem INDEGO sorgt für maximalen Fahrkomfort.
- Gut ablesbare Piktogramme und Informationen dank einer großen und übersichtlichen Bedienkonsole.
- Optimale Sitzhaltung durch den vielfach verstellbaren bequemen Sitz: Sitzhöhe, Sitztiefe, Neigung der Rücklehne sowie Höhe, Weite und Winkel der Armlehnen sind frei verstellbar.
- Großzügige Bein- und Fußfreiheit dank ergonomischer Formgestaltung.

Eigenschaften

- Einstellbare Geschwindigkeit bis 15 km/h
- Maximaler Aktionsradius 44 km*
- Kleiner Wendekreis von 160 cm.
- Hohe maximale Zuladung von 160 kg.
- Abnehmbarer Einkaufskorb aus Kunststoff.
- Moderne Schlauchlosreifen mit geringerem Rollwiderstand.

* Unter perfekten Bedingungen



Presto S

Noch sportlicher

Machen Sie gerne Ausflüge und mögen es etwas sportlicher? Für das Presto S, mit seinem stylischen Design und seiner sicheren Ausstattung, ist das kein Thema. Durch seinen kleinen Wendekreis und den leistungsfähigen Motor fahren Sie agil und schnell durch die Stadt oder über Hindernisse. Das Presto S ist

mit einem Tagfahrlicht ausgestattet. Dadurch sind Sie im Verkehr noch besser sichtbar. Mit viel Fußfreiheit und den Gummistoßfängern kommen Sie entspannt an Ihr Ziel. Und mit dem schlichten, schwarzen Design in matt und glänzend können Sie sich überall sehen lassen

INDEGO

Federungssystem



15 km/h



44 km



SDS SAFE DRIVING SOLUTIONS

Sicherheit

- Damit Sie besser sichtbar sind, haben wir die Fahrtrichtungsanzeiger hoch angesetzt und die Rücklichter so angebracht, dass sie auch von der Seite her sichtbar bleiben.
- Die Fahrtrichtungsanzeiger sind mit einem Tagfahrlicht ausgestattet. Dadurch sind Sie im Verkehr noch besser sichtbar.
- Schwertscheinwerfer mit LED-Beleuchtung für bessere Sicht in Kurven.
- Sie können sich ganz auf die Straße konzentrieren, weil die Bedienknöpfe fühlbare Druckpunkte haben und innerhalb der Reichweite des Daumens liegen.
- Bei Kurvenfahrten behalten Sie die volle Kontrolle, da die Geschwindigkeit automatisch so angepasst wird, dass Sie sicher unterwegs sind.
- Die Fahrtrichtungsanzeiger werden nach einer Kurve automatisch zurückgestellt und lassen sich sicher bedienen, ohne die Lenkung loszulassen.

EDS ERGONOMIC DRIVING SOLUTIONS

Bequem fahren

- Das einzigartige Federungssystem INDEGO sorgt für maximalen Fahrkomfort.
- Gut ablesbare Piktogramme und Informationen dank einer großen und übersichtlichen Bedienkonsole.
- Optimale Sitzhaltung durch den vielfach verstellbaren bequemen Sitz: Sitzhöhe, Sitztiefe, Neigung der Rücklehne sowie Höhe, Weite und Winkel der Armlehnen sind frei verstellbar.
- Großzügige Bein- und Fußfreiheit dank ergonomischer Formgestaltung.

Eigenschaften

- Einstellbare Geschwindigkeit bis 15 km/h
- Maximaler Aktionsradius 44 km*.
- Kleiner Wendekreis von 160 cm.
- Hohe maximale Zuladung von 160 kg.
- Gummistoßfänger rundum.
- Abnehmbarer Einkaufskorb aus Kunststoff.
- Moderne Schlauchlosreifen mit geringerem Rollwiderstand.


* Unter perfekten Bedingungen




Verstellbare Lenkung



Gummistoßfänger rundum

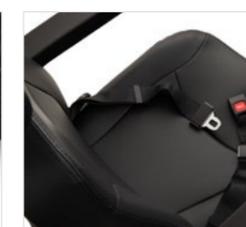

Ergonomischer Sitz

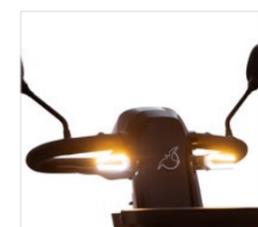

Tagfahrlicht

Vivo

Klein aber o-ho

Elegant, komfortabel und sicher: das Vivo. Dieses kompakte Reise-Elektromobil lässt sich ohne Werkzeug einfach auseinandernehmen und dadurch überall hin mitnehmen. Aufgrund des kleinen Wendekreises ist Vivo ausgesprochen manövrierfähig. Die breiten Luftreifen sorgen für höchste Stabilität.

Die Federung der Hinterachse und der breite Sitz mit vorgeformten Armlehnen bieten unvergleichlichen Komfort. Und mit einem Aktionsradius von bis zu 28 km können Sie sich unbesorgt auf den Weg machen. Genießen Sie die Freiheit, die der Vivo Ihnen bietet.



INDEGO
Federungssystem



6 km/h



28 km

● ● ● Lieferbare Farben



Einfache Bedienung



Zerlegbar



Ausgezeichnete Federung



Abnehmbarer Korb



SDS SAFE DRIVING SOLUTIONS

Sicherheit

- Stabilität durch große, breite Luftreifen und neigbare Achse, damit die Räder immer den Bodenkontakt halten.
- Hohe Bodenfreiheit. Dadurch kann das Vivo Hindernisse gut überfahren.
- Die Rückrollsperr verhindert ungewolltes Rückwärtsfahren an Gefällen.
- Durch verstellbare Geschwindigkeitsstufen kann die Höchstgeschwindigkeit einfach der Umgebung angepasst werden.

EDS ERGONOMIC DRIVING SOLUTIONS

Bequem fahren

- Die stufenlose Lenkerwinkelverstellung sorgt für eine optimale Sitzposition.
- Die Sitzhöhe lässt sich an die Körpergröße anpassen.
- Der Sitz ist breit und tief, mit vorgeformten Armlehnen.
- Die gefederte Hinterachse und die vier Luftreifen sorgen für ein bequemes Fahrerlebnis.
- Großzügige Beinfreiheit aufgrund des ergonomischen Designs.
- Mit dem kleinen Wendekreis auch in engen Räumen, beispielsweise in Geschäften, perfekt manövrierbar.

Eigenschaften

- Einstellbare Geschwindigkeit bis 6 km/h.
- Maximaler Aktionsradius 28 km*.
- Hohe maximale Zuladung von 120 kg.
- Mit Akkus (22 Ah) und Ladegerät (3 A).
- Standardmäßig mit Antikippprädem ausgestattet.
- Magnetschlüssel in verbesserter Ausführung.
- Kunststoffkorb mit Handgriff, Schnellverschlussystem und zusätzlich verstärkter Halterung.
- In 5 Teile zerlegbar, für einfache Beförderung und Lagerung (das schwerste Teil wiegt 20,5 kg).

* Unter perfekten Bedingungen



Sicherheit ist die Norm

Unsere Elektromobile werden sicher und durchdacht konstruiert. Es bleibt nicht bei schönen Worten. Wir kaufen Materialien von höchster Qualität. Gemeinsam mit unseren Produktentwicklern haben wir unsere Safe Driving Solutions (SDS) entwickelt: ein Paket mit verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen wie höhere Stabilität und bessere Sicht. Unsere Modelle haben alle vier Räder. Das macht das Fahren nicht nur komfortabel, sondern verleiht vor allem Stabilität.

Solo, Presto und Presto S sind mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Das sorgt dafür, das Sie besser sehen und im Verkehr besser gesehen werden. Das große und übersichtliche Display lässt

sich bequem mit einer Hand bedienen. Dadurch können Sie sich vollständig auf die Straße konzentrieren. Unser Modell Solo ist standardmäßig mit einem Not-Halt-Knopf ausgestattet, mit dem das Elektromobil sicher zum Stillstand gebracht und unter Kontrolle gehalten werden kann.

Sie sind zu schnell oder zu scharf in eine Kurve gefahren? Die Geschwindigkeitskorrektur vom Solo, Presto und Presto S kann Einschätzungsfehler berichtigen und die Geschwindigkeit in Kurven automatisch anpassen. Die Fahrtrichtungsanzeiger stellen sich nach der Kurve automatisch zurück.




	Solo Solo Blue Diamond Solo Elegance	Presto Presto S	Vivo
Bedienung der Fahrtrichtungsanzeiger in Handreichweite von Gas-/Bremsfunktion	●	●	
Einstellbare/programmierbare Geschwindigkeitsstufen	●	●	●
Not-Halt-Knopf	●		
Selbstrückstellende Fahrtrichtungsanzeiger	●	●	
Geschwindigkeitskorrektur in Kurven	●	●	
Große Räder, mit denen Sie Hindernisse sicher bewältigen	●	●	
Schwenkbare Beleuchtung		●	
Federungssystem INDEGO+	●		
Federungssystem INDEGO		●	●
Stabilität dank großer breiter Luftreifen	●	●	●
Pendelaufhängung der Vorderachse, damit die Räder die Bodenhaftung nicht verlieren	●	●	●
Große Bodenfreiheit	●	●	●
Rückrollsperr	●	●	●
Geschwindigkeit in Fußgängerzonen schnell anpassbar	●	●	●
Bedienknöpfe mit fühlbaren Druckpunkten	●	●	●



Schwenkscheinwerfer (Presto, Presto S)



Große Räder (Solo, Presto, Presto S)

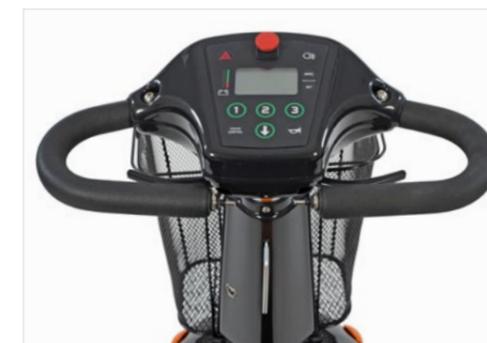

Display mit Not-Halt-Knopf (Solo)



Gut sichtbare LED-Beleuchtung (Presto, Presto S)



Immer bequem fahren

Bequem fahren, darauf kommt es an. Deshalb beschäftigen wir hausintern Ergo- und Physiotherapeuten. Menschen, die genau wissen, wie der Körper funktioniert. Sie waren an der Entwicklung der Ergonomic Driving Solutions (EDS) beteiligt. Ein Paket mit ergonomischen Lösungen, die dafür sorgen, dass sich unsere Elektromobile an Ihren Körper anpassen lassen. Gutes Design ist etwas Schönes, aber bequemes Fahren ist für

jeden Elektromobilfahrer noch viel wichtiger. Das Federungssystem INDEGO leistet einen wichtigen Beitrag zu bequemem Fahren. Sie brauchen nicht auf jede Unebenheit in der Fahrbahn zu achten. Wahrscheinlich bemerken Sie sie nicht einmal. Die überraschend großzügige Beinfreiheit lässt Sie entspannt und komfortabel fahren, insbesondere auf langen Fahrten.

	Solo Solo Blue Diamond Solo Elegance	Presto Presto S	Vivo
Federungssystem INDEGO+	●		
Federungssystem INDEGO		●	●
Benutzerspezifischer Sitz, Wahl aus: Format, Weichheit und Unterstützung	●		
Stufenlose Lenkerwinkeleinstellung	●	●	●
Einstellung der Lenkerhöhe	●		
Benutzerspezifische Federung	●		
Sitzfederung	●		
(Stufenlos) Einstellbare Sitzhöhe	●	●	●
Verstellbare Lendenwirbelstütze	●		
Großzügige Beinfreiheit	●	●	●
Tempomat	●		



Das Federungssystem INDEGO

Der menschliche Körper ist nicht für seitliche Belastungen geschaffen. Unsere Wirbelsäule bewegt sich mühelos nach vorne und hinten, aber bei Seitwärtsbewegungen sind wir weniger geschmeidig und Stöße haben schnell unangenehme Folgen. Um den Körper bei Seitwärtsbewegungen so wenig wie möglich zu belasten, sind unser Solo, Presto und Presto S mit dem einzigartigen patentierten Federungssystem INDEGO ausgestattet. Vom Vivo gibt es ein eigenes Modell, dessen Vorderräder über diese

einzigartige Federung verfügen. Das Federungssystem des INDEGO basiert auf Gummi und gleicht Unebenheiten der Straße aus. Dadurch werden Stöße direkt abgefangen, unabhängig von der Zuladung durch den Benutzer. Bei Gummi braucht nämlich keine Anfangskraft überwunden zu werden, wie es bei einer Spiralfederung der Fall ist. Deshalb genießen Sie unvergleichlichen Komfort. Und können sich vollständig auf den Verkehr konzentrieren.

INDEGO

Stabilität

Minimiert schädliche Stöße durch geringere Seitenbelastung.

Unabhängige Federung

Die Räder federn unabhängig vom Rahmen.

Sicherheit bei Hindernissen

Die Straßenlage bleibt stabil, auch bei Bodenschwellen und Hindernissen.

Fahrkomfort


Bequemes Fahrerlebnis dank der natürlich dämpfenden Eigenschaften der Gummifederung.

Aufrechte Wirbelsäule

Aufrechte Haltung trotz Unebenheiten in der Straßendecke.

Geeignet für raues Gelände

Macht auch unzugänglicheres Terrain einfach befahrbar.

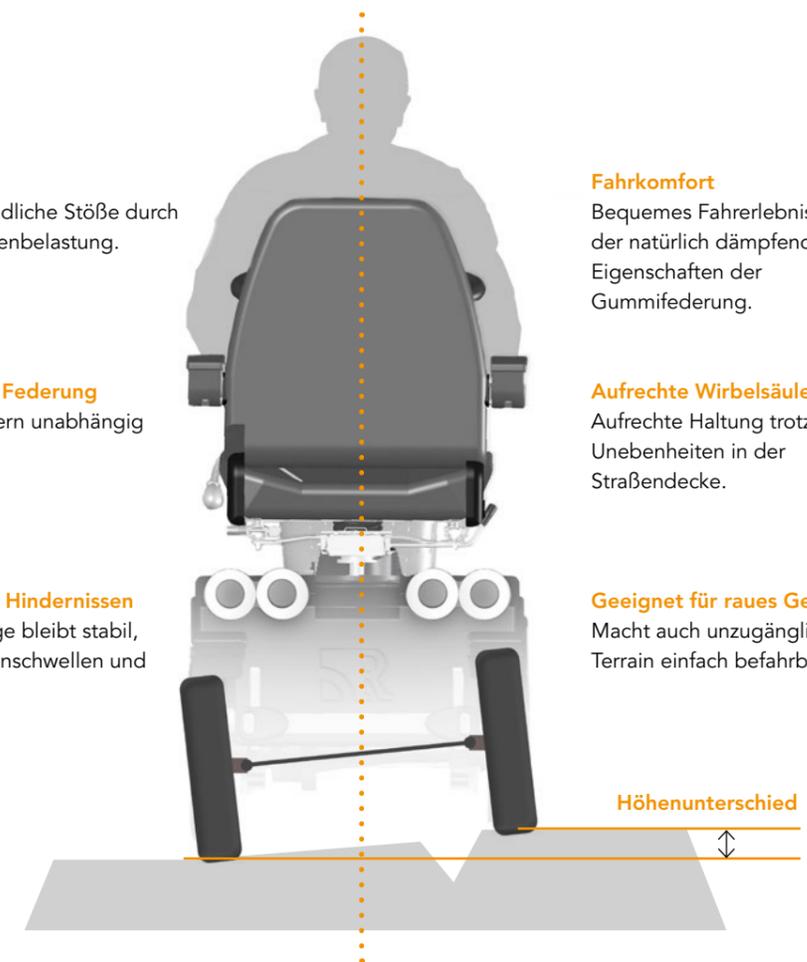

Produktsortiment



Eigenschaften

Solo

Solo Blue Diamond

Solo Elegance

Presto

Presto S

Vivo

Höhe Elektromobil	120 cm	120 cm	120 cm
Länge Elektromobil	140 cm	140 cm	140 cm
Breite Elektromobil	64 cm	64 cm	64 cm
Höhe Trittbrett	17 cm	17 cm	17 cm
Sitzbreite	48 cm	48 cm	48 cm
Sitztiefe	44 cm	44 cm	44 cm
Sitzhöhe über Trittbrett	45 – 53 cm	45 – 53 cm	45 – 53 cm
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h	15 km/h	15 km/h
Aktionsradius	35 / 45 / 65 km*	35 / 45 / 65 km*	35 / 45 / 65 km*
Akku (Gel)	60 / 73 / 97 Ah	60 / 73 / 97 Ah	60 / 73 / 97 Ah
Ladegerät	6 A / 24 V, 8 A / 24 V, 12 A / 24 V	6 A / 24 V, 8 A / 24 V, 12 A / 24 V	6 A / 24 V, 8 A / 24 V, 12 A / 24 V
Gesamtgewicht (ohne Akkus)	105 kg	105 kg	105 kg
Maximale Zuladung	160 kg (Option: 200 kg)	160 kg (Option: 200 kg)	160 kg (Option: 200 kg)
Wendekreis	167 cm	167 cm	167 cm
Maximale Steigfähigkeit	10°	10°	10°
Radgröße	3,00 – 16"	3,00 – 16"	3,00 – 16"
Entspricht	EN 12184 Klasse C	EN 12184 Klasse C	EN 12184 Klasse C
Farben	Orange/Silber	Blau	Champagner

114 cm	114 cm	92 cm
134 cm	138 cm	108 cm
65 cm	65 cm	58 cm
19 cm	19 cm	9 cm
51 cm	51 cm	46 cm
44 cm	44 cm	45 cm
47 – 54,5 cm	47 – 54,5 cm	40 / 42,5 / 45 / 47,5 cm
15 km/h	15 km/h	6 km/h
29 / 35 / 44 km*	29 / 35 / 44 km*	28 km*
50 / 60 / 73 Ah	50 / 60 / 73 Ah	24 V / 22 Ah
6 A / 24 V, 8 A / 24 V	6 A / 24 V, 8 A / 24 V	3 A / 24 V
87 kg	87 kg	63 kg
160 kg	160 kg	120 kg
160 cm	160 cm	118,5 cm
10°	10°	6°
3,00 – 16"	3,00 – 16"	24 x 7,5 cm
EN 12184 Klasse C	EN 12184 Klasse C	EN 12184 Klasse A
Gelb / Rot / Silber	Schwarz	Schwarz / Silber / Blau

*Abhängig von der eingestellten Geschwindigkeit, der Außentemperatur, dem Gewicht des Nutzers, dem Reifendruck usw.



Life & Mobility GmbH

Oderstraße 59
14513 Teltow (Berlin)
T +49 (0) 3328 3381300
F +49 (0) 3328 3381301

www.life-mobility.com
verkauf@life-mobility.com

Hauptsitz

Life & Mobility B.V.
Logistiekweg 7
NL- 7007 CJ Doetinchem
T +31 (0)314 - 328 000

Ihr Life & Mobility-Elektromobilihändler:



Inspired by life