

# Produktübersicht

**KELVIN** **ML**

## Kelvin mobiles Lagerungssystem


### STANDARD AUSSTATTUNG BEINHÄLTET:

Mobilität	Sitzunterstützung
Hinterrad mit Vollgummireifen	Sitzhöhe 51 cm (200x42 / 12,5")
Standard Fußbremse mit 1 Bremshebel rechts	Maß M48
	Standard Seitenkissen
	Sitzkissen flach
	Klassische Beinstütze



## Spezifizierung

AFK.	MESSPUNKTE	
SB	Sitzbreite*	S=34-40 / M=40-46 / L=46-52 cm
ST	Sitztiefe*	40 - 48 / 48 - 56 / 56 - 64 cm
SH	Sitzhöhe	51 / 56 cm
RH	Rückenhöhe	55 cm
HA	Höhe der Armlehnen	17 - 26 cm (6 Positionen)
BR	Breite des Rollstuhls**	63 / 63 / 68 cm
	Breite des Rollstuhls + Aura Schiebeunterstützung	72 cm
UL	Unterschenkelänge:***	
	Winkelverstellbare Beinstütze	45 - 60 cm
	Zentrale Beinstütze	48 - 64 cm / 59 - 76 cm
	Klassische Beinstütze	30 - 50 cm
	Flex Beinstütze	30 - 44 cm
	Swing Beinstütze	38 - 50 cm
	Einstellung der Sitzneigung	0 - 30°
	Einstellung der Rückenneigung	Einmalig einstellbar
	Höchstgewicht des Benutzers	125 kg
	Erfüllt	EN 12182, EN 12183, ISO 7176-19 (Crashtest safe)

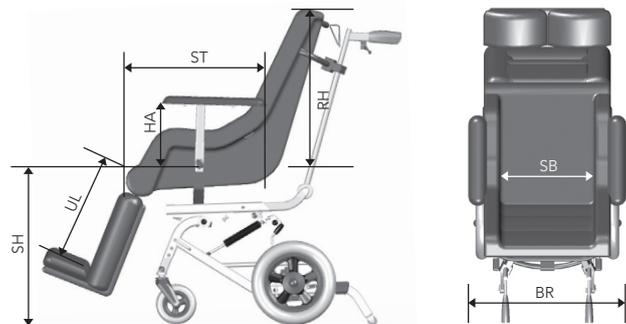

\* Die Mindestabmessung wurde auf dem Sitzkissen gemessen. Durch stärkere oder geringere Füllung der Kelvin-Kissen können die Sitzbreite und -tiefe individuell angepasst werden.

\*\* Breite des Rollstuhls ohne Armlehnen

\*\*\* In Kombination mit Sitzkissen keilförmiger Vorderseite gilt UL + 8 cm



# Produktübersicht

Bestellung

Kostenvoranschlag

Rechnungsadresse:	
Name:	Ansprechpartner:
Straße:	
PLZ:	Ort:
Tel:	

Versandadresse:	
Name:	Ansprechpartner:
Straße:	
PLZ:	Ort:
Tel:	

Kommission:	
Name:	Ansprechpartner:
Straße:	
PLZ:	Ort:
Tel:	
Krankenkasse / Diagnose:	

Datum:
Mitarbeiter Fachhändler:
Email:
Tel:
Mitarbeiter L&M DE:

## MODELL

CK00000010 Mit flach Sitzkissen, standard Seitenkissen, klassische Beinstütze, verstellbarer Sitzneigung (Bereich 0 bis 30°), ovalen Schiebegriffen in Höhe verstellbar und mit verstellbarem Neigungswinkel, Rückenwinkel einstellbar, zentral angebrachte Fußbremse, vollgummireifen vorn, integrierte Auftrittskappe, Antikippstützen<sup>1</sup> und Transportbefestigung für Vierpunktbefestigungssystem<sup>2</sup>, Farbe des Rahmens Midnight blue

1 Aus Gründen der präventiven Sicherheit gehören Antikippstützen zum Lieferumfang und werden die Hinterräder in hintere Position montiert  
 2 Kelvin mobiles Lagerungssystem ist aufrallsicher gemäß ISO 7176-19

## HILFSANTRIEB

### Aura Schiebeunterstützung<sup>1</sup>

CK20000090 Hilfsmotoren in Hinterrädern mit semimassiven (Vollgummi) Reifen, automatische Parkbremse<sup>2</sup>, Controller & Leichtgewicht Li-Ionenbatterie unter dem Sitz, 200x42 (8")- Vorderräder mit semi-massiven (Vollgummi) Reifen & Aluminiumgabeln + dazugehöriges Ladegerät. Bedienungseinheit mit Aura Manövrierfunktion für Daumen- oder Pinch-Steuerung rechts auf Schiebegriff mit verstellbarem Neigungswinkel und mit Vorwärts- und Rückwärts funktion, Drehknopf mit Aus-Stellung, 4 (einstellbare) Geschwindigkeiten + Haus-Stellung, inkl. Batterieanzeige

- CK200040030 Daumen Steuerung rechts
- CK200040050 Pinch Steuerung rechts

1 Wählen Sie immer einen Steuerungsmodus  
 2 Aufgrund der automatischen Parkbremse von Aura sind Kelvin mobiles Lagerungssystem-Bremssysteme nicht erforderlich

## SITZHÖHE

- S CK040000050 51 cm (200x42 / 12½")
- CK040000060 56 cm (200x42 / 12½")

## RÄDER

### Typ Hinterrad<sup>1</sup>

- S CK060000020 Vollgummireifen
- CK060000010 Luftreifen<sup>2</sup>

1 Aus Gründen der präventiven Sicherheit gehören Antikippstützen zum Lieferumfang und werden die Hinterräder in hintere Position montiert  
 2 Nicht möglich in Kombination mit Aura Schiebeunterstützung

### Bremstyp<sup>1</sup>

- S CK070000010 Standard Fußbremse mit 1 Bremshebel rechts
- CK070000020 Standard Fußbremse mit 2 Bremshebeln
- CK070000030 Bedienung Trommelbremsen durch Begleitperson

1 Aufgrund der automatischen Parkbremse von Aura sind Kelvin mobiles Lagerungssystem-Bremssysteme nicht erforderlich

## SITZSYSTEM

### Kelvin mobiles Lagerungssystem<sup>1</sup>

- CK230000010 Maß S40
- CK230000020 Maß S48
- CK230000030 Maß M40
- S CK230000040 Maß M48
- CK230000050 Maß M56
- CK230000060 Maß L48
- CK230000070 Maß L56
- CK140000070 Kopfstützenadapter

1 Siehe Maßangabe Kelvin mobiles Lagerungssystem (Seite 4)

### Seitenkissen Rücken

- S CK860030010 Standard Seitenkissen links
- S CK860040010 Standard Seitenkissen rechts
- CK860030020 Birnenförmige Seitenkissen links
- CK860040020 Birnenförmige Seitenkissen rechts



# Produktübersicht

## Zusätzliche individuelle Rückenunterstützung

- CK970000010 Lumbalstützkissen
- CK970030030 Seitenstützkissen lang (in Kombination mit Seitenplatte) links
- CK970040030 Seitenstützkissen lang (in Kombination mit Seitenplatte) rechts
- CK970030020 Seitenstützkissen kurz (in Kombination mit Seitenplatte) links
- CK970040020 Seitenstützkissen kurz (in Kombination mit Seitenplatte) rechts

## Sitzkissen

- S** CK240000010 Sitzkissen flach
- CK240000020 Sitzkissen mit Abduktionskeil
- CK240000030 Sitzkissen mit keilförmiger Vorderseite, 8 cm hoch<sup>1</sup>
- CK240000040 Sitz- und Beinkissen mit durchgehendem Abduktionskeil (inklusive Klassische Beinstütze)<sup>2,3</sup>

1 Unterschenkelhöhe erhöht sich um 8 cm i.K.m. keilförmiges Sitzkissen

2 Bei Maß S40 und L56 ist die Lieferzeit auf Antrag

3 Nur möglich mit der Klassischen Beinstütze (keine andere Beinstütze)

## BEINSTÜTZE

- CK110000010 Winkelverstellbare Beinstützen<sup>1</sup>
  - CK110000020 Laterale Kniepolsterung
  - CK110000030 Fersenriemen
  - CK110030040 Kniewinkelbedienung mittels Gasfeder links
  - CK110040040 Kniewinkelbedienung mittels Gasfeder rechts
- CK110000140 Winkelverstellbare Beinstützen verstärkt<sup>1,2</sup>
  - CK110000020 Laterale Kniepolsterung
  - CK110000030 Fersenriemen
- CK110000080 Zentrale Beinstütze<sup>1</sup> Standard (UL = 48 - 64 cm)
- CK110000090 Zentrale Beinstütze<sup>1</sup> Verlängert (UL = 59 - 76 cm)
  - CK110000100 Seitenteile in Breite einstellbar für zentrale Beinstütze
  - CK110000110 Einstellung Wadenplattentiefe für zentrale Beinstütze
- S** CK110000060 Klassische Beinstütze (standard)
- CK110000130 Klassische Beinstütze-Rahmen zugunsten Sitz-Beinkissen mit durchgehendem Abduktionskeil
- CK110000120 Flex Beinstütze<sup>3,4</sup>
- CK110000070 Swing Beinstütze<sup>1</sup>

1 Inklusiv Vorbrücke

2 Der Einstellbereich der Armlehne, mit oder ohne zusätzliche Optionen, kann begrenzt werden. Kommt mit schwarz gepolsterten Wadenplatten

3 Nicht möglich in Kombination mit Sitzkissen mit Abduktionskeil

4 In Kombination mit der Aura wird der minimale Kniewinkel durch die Aura-Akkubox eingeschränkt

## BEZUG<sup>1,2</sup>

- CK250000010 Frotteebezug ..... St. ab
- CK250000030 Bezug für Sitzkissen mit Abduktionskeil +
- CK250000060 Bezug für Flex Beinstütze +
- CK250000040 Bezug für Klassische Beinstütze +
- CK250000050 Frotteebezug für Swing Beinstütze ..... St.
- CK250000070 Frotteebezug zugunsten durchgehende Abduktion ..... St.

1 Mit Inkontinenzmaterial und Schlitzen für Haltegurt

2 Nur lieferbar in Blau

## ARMLEHNE

- CK100030060 Höhenverstellbare Armlehne gepolstert (5 cm) links
- CK100040060 Höhenverstellbare Armlehne gepolstert (5 cm) rechts
- CK100030010 Höhenverstellbare Armlehne breit (10 cm) links
- CK100040010 Höhenverstellbare Armlehne breit (10 cm) rechts
- CK100030070 Höhen und Winkel verstellbare Armlehne gepolstert (5 cm) links
- CK100040070 Höhen und Winkel verstellbare Armlehne gepolstert (5 cm) rechts
- CK100030050 Höhen und Winkel verstellbare Armlehne breit (10 cm) links
- CK100040050 Höhen und Winkel verstellbare Armlehne breit (10 cm) rechts
- CK100030020 Flex Armkissen links
- CK100040020 Flex Armkissen rechts
- CK100030040 Flex Armkissen erschwert links
- CK100040040 Flex Armkissen erschwert rechts
- CK100030030 Frotteebezug für Flex Armkissen<sup>1</sup> links ..... St.
- CK100040030 Frotteebezug für Flex Armkissen<sup>1</sup> rechts ..... St.

1 Nur lieferbar in Blau

## KOPFSTÜTZE

- CK140000010 Kelvin Kopfstütze klein
- CK140000020 Kelvin Kopfstütze klein mit Edison Mechanik
  - CK140000050 Frotteebezug für Kelvin Kopfstütze klein<sup>1</sup> ..... St.
- CK140000030 Kelvin Kopfstütze groß
  - CK140000060 Frotteebezug für Kelvin Kopfstütze groß<sup>1</sup> ..... St.

1 Nur lieferbar in Blau



# Produktübersicht

THERAPIETISCH	
<input type="checkbox"/>	CK150000010 Plexiglas Therapietisch <sup>1</sup>
<input type="checkbox"/>	CK150000020 Ellenbogenpolster <sup>2</sup>
1 Nur möglich auf höhenverstellbare und höhen/winkel verstellbaren Armlehnen	
2 Nur möglich mit einem Therapietisch	

ZUBEHÖR		
<input type="checkbox"/>	CK160000060 Rückenwinkelkissen	
<input type="checkbox"/>	CK160000010 Nachfüllpackung 20 Liter 2,5 mm PUR Kugeln-Latex	
<input type="checkbox"/>	CK160000020 Nachfüllpackung 20 Liter Latex für Sitzkissen	
<input type="checkbox"/>	CK160000050 Xtra-safe-Adapter für Antikippstützen <sup>1</sup>	
<input type="checkbox"/>	CK160000030 Haltegurt	
<input type="checkbox"/>	CK140000040 Kelvin Nackenkörnerkissen	
<input type="checkbox"/>	CK160000070 Geräteträgerplattform <sup>2,3</sup>	(AD-Lieferzeit auf Anfrage)
<input type="checkbox"/>	CK160000080 Infusionsständer (rechts) in Winkel und Höhe verstellbar <sup>3</sup>	(AD-Lieferzeit auf Anfrage)
1 Mit den Xtra-safe-Adapter kann die Anti-Kipp-Vorrichtung weiter hinten montiert werden, was eine vorbeugende Sicherheitsmaßnahme darstellt		
2 Nur möglich i.K.m. Trommelbremsen, Bedienung durch Begleitperson oder der Aura Schiebehilfe		
3 Es gilt der Rabatt für Sonderanfertigungen		



### Erläuterung

Bei Abweichungen von den oben genannten Möglichkeiten verweisen wir Sie auf das ergänzende Bestellformular für Sonderanfertigungen.

### Maßangabe Kelvin mobiles Lagerungssystem:

	SB	ST	RH	BR
Maß S40	34-40 cm	40-48 cm	55 cm	63 cm
Maß S48	34-40 cm	48-56 cm	55 cm	63 cm
Maß M40	40-46 cm	40-48 cm	55 cm	63 cm
Maß M48	40-46 cm	48-56 cm	55 cm	63 cm
Maß M56	40-46 cm	56-64 cm	55 cm	63 cm
Maß L48	46-52 cm	48-56 cm	55 cm	68 cm
Maß L56	46-52 cm	56-64 cm	55 cm	68 cm

BR = Breite des Rollstuhls ohne Armlehnen

# Übersicht und Beschreibung des Kelvinsystems

Beschreibung Sitzelement		Beschreibung Beinelemente	
<p><b>Kelvin Sitzelement:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einzigartiges Latex-Granulatfüllung-Sitzsystem mit individueller Unterstützung über den ganzen Körper</li> <li>- Gute Druckverteilung</li> <li>- Mit Rückenwinkleinstellung</li> <li>- Erhältlich mit standard- oder birnenförmigen Seitenkissen</li> </ul>		<p><b>Winkelverstellbare-Beinstütze:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuß- und Beinunterstützung mit Kniewinkelverstellung</li> <li>- Herausnehmbar und wegschwenkbar</li> <li>- Knieverstellung mit Längenkompensierung</li> <li>- Individuell einstellbare Unterschenkelhöhe</li> <li>- Knöchelwinkel ein- bzw. verstellbar</li> <li>- Fersengurt, Kniekissen und Gasfeder (Option)</li> </ul>	
<p><b>Kelvin Sitzkissen flach:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gute Druckverteilung durch anpassbare Latexfüllung</li> <li>- Sitzstabilität durch Grundsicht aus Schaumstoff</li> </ul>		<p><b>Zentrale Beinstütze:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentrale Beinunterstütze mit Kniewinkelverstellung und Gasfeder</li> <li>- einstellbare Unterschenkelhöhe, Knöchelwinkel, Wadenplattenhöhe</li> </ul>	
<p><b>Sitzkissen mit Abduktionskeil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Abduktionsform verhindert einen längeren Kontakt zwischen beiden Beinen</li> <li>- Druckverteilung durch anpassbare Latexfüllung</li> <li>- Sitzstabilität durch Grundsicht aus Schaumstoff</li> </ul>		<p><b>Classic-Beinstütze (CBS):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sehr gute Lagerung durch anpassbare Latex-Granulatfüllung</li> <li>- Einstellbarer Knie- und Knöchelwinkel</li> <li>- Individuell einstellbare Unterschenkelhöhe</li> </ul>	
<p><b>Kelvin Keilkissen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keilförmige Basis für eine sehr gute Sitzstabilität, um Verrutschen zu vermeiden</li> <li>- Gute Druckverteilung durch anpassbare Latexfüllung</li> </ul>		<p><b>Swing-Beinstütze (SBS):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sehr gute Lagerung durch anpassbare Latex-Granulatfüllung</li> <li>- Einstellbarer Kniewinkel mit Längenkompensierung</li> <li>- Individuell einstellbare Unterschenkelhöhe</li> <li>- Herausnehmbar und wegschwenkbar</li> </ul>	
<p><b>Kelvin Sitz-/Beinkissen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diese durchlaufende Abduktionsform verhindert einen längeren Kontakt zwischen beiden Beinen, etwa an Knien oder Knöcheln, zum Schutz vor Druckstellen oder erhöhter Muskelspannung</li> </ul>		<p><b>Flex-Beinstütze (FBS):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sehr gute Lagerung durch anpassbare Latex-Granulatfüllung</li> <li>- Kniewinkel bis 90 Grad einstellbar durch konisch zulaufende Form</li> <li>- Individuell einstellbare Unterschenkelhöhe</li> <li>- Knöchelwinkel einstellbar</li> </ul>	
Beschreibung Kopfstützen		Beschreibung seitliche Rumpfanstützung	
<p><b>Kelvin-Kopfstütze klein:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Latex-Granulatfüllung mit anpassbarer Füllung</li> <li>- Nimmt automatisch jede Form an</li> <li>- Höhen- und winkelverstellbar</li> <li>- Einstellschrauben für die richtige Höhe</li> <li>- Stretchgummi Verkleidung</li> <li>- Frotteeüberzug erhältlich</li> </ul>		<p><b>Standard-Seitenkissen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachfüllbare Seitenkissen für die richtige seitliche Unterstützung des Rumpfes</li> <li>- typische Form männlicher Oberkörper</li> </ul>	
<p><b>Kelvin-Kopfstütze groß:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Latex-Granulatfüllung mit anpassbarer Füllung</li> <li>- Nimmt automatisch jede Form an</li> <li>- Höhen- und winkelverstellbar</li> <li>- Einstellschrauben für die richtige Höhe</li> <li>- Stretchgummi Verkleidung</li> <li>- Auch als Rückenverlängerung nutzbar</li> <li>- Frotteeüberzug erhältlich</li> </ul>		<p><b>Birnenförmige Seitenkissen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachfüllbare Seitenkissen für die richtige seitliche Unterstützung des Rumpfes</li> <li>- typische Form weiblicher Oberkörper</li> </ul>	
<p><b>Kelvin Nacken- und Kopfkissen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Latex-Granulatfüllung mit anpassbarer Füllung</li> <li>- Nimmt automatisch jede Form an</li> <li>- Vollständige Unterstützung von Nacken und Kopf</li> <li>- Mit Reißverschluss an der Oberseite des Kelvin-Sitzelements anzubringen</li> <li>- Stretchgummi Verkleidung</li> </ul>		Beschreibung (Um)Armungsstütze	
		<p><b>Flex-Armstütze:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Latex-Granulatfüllung mit anpassbarer Füllung</li> <li>- Für Geborgenheit und Entspannung</li> <li>- Auch in schwererer Ausführung erhältlich</li> <li>- Stretchgummi Verkleidung</li> <li>- Frotteeüberzug erhältlich</li> </ul>	