



# Produktübersicht

**MATCH**
**MATCH UNTERGESTELL - GRUNDMODELL**

Mobilität	Sitzsystem	Sitzfunktionen
7" Vollgummireifen vorne Höhenverstellbaren Schiebegriffen Nabenbremse mit Bremshebel Integrierter Auftrittkapp Antikippstützen <sup>1</sup> 4-Punkt-Befestigungssystem für Taxibus Farbe Rahmen Quartz Einschl. Schlüsselset	Standard Sitzschaletiefe Sitzhöhsensäule Führungssäule 2 Verstellbarem Sitzwinkel (-5° - 30°) mit Anzeige und Begrenzung	Einstellbarem Radstand und Spurweite vorne und hinten Einstellbarer Schwerpunktposition Einstellung des Rückenwinkels Einstellbarer Sitzhöhe, Sitzbreite und Sitztiefe



Hilfsmittelverzeichnisnummer: 26.99.01.1043

MESSPUNKTE	SPEZIFIZIERUNG	
Sitzschalebreite (SB)	42 - 67 cm (gebogenes Armlehnenrohr 1 & 2)	
Sitzschaletiefe (ST)	40 - 65 cm (30 - 55 cm i.K.m. Sitztiefe-Verkürzer)	
Sitzhöhe (SH)	30 - 60 cm (Führungssäule 1, 2, 3 & 4)	
Radstand (RS)	50 - 60 cm	
Rollstuhlbreite (RB) hinten	60 - 78 cm	
Rollstuhlbreite (RB) vorne	60 - 75 cm	
Schwerpunkt Einstellung (SE)	Verstellbereich 15 cm	
Armlehnenhöhe (AH)	17 - 40 cm	
Beinstützenbreite (BB)	39 - 69 cm (Winkelverstellbare Beinstütze)	
Rückenlehnenrohrhöhe (RH)	52 cm	
Schiebehandgriffhöhe (SGH)	80 - 150 cm (Bereich ist verstellbar) (SGH abhängig von SH)	
Unterschenkellänge (UL): Winkelverstellbare Beinstütze Zentrale Beinstütze	35 - 45 cm / 40 - 55 cm abhängig von AHS	
Auflagenhöhe Sitzschale (AHS)	Vertikaler Abstand Oberkante Montageplatte - Unterkante Oberschenkel an der Vorderseite der Sitzschale	
Sitzwinkleinstellung	-5° - 30° (verstellbarer Bereich)	
Einstellung des Rückenwinkels	85° - 140° (verstellbarer Bereich)	
Armlehntiefe AT	Einstellbereich 8 cm	
Gesamtgewicht Basismodell	37,5 kg	
Höchstgewicht des Benutzers	160 kg	
Eine aufprallsicherer Match Kombination erfüllt	EN 12182, EN 12183, ISO 7176-19	

<sup>1</sup> Aus Gründen der präventiven Sicherheit ist der Match standardmäßig mit Antikippstützen ausgestattet



# Produktübersicht

Bestellung

Kostenvoranschlag

Rechnungsadresse:	
Name:	Ansprechpartner:
Straße:	
PLZ:	Ort:
Tel:	

Versandadresse:	
Name:	Ansprechpartner:
Straße:	
PLZ:	Ort:
Tel:	

Kommission:	
Name:	Ansprechpartner:
Straße:	
PLZ:	Ort:
Tel:	
Krankenkasse / Diagnose:	

Datum:
Mitarbeiter Fachhändler:
Email:
Tel:
Mitarbeiter L&M DE:

## MODELL


<input checked="" type="checkbox"/>	MZ00000000	Match Untergestell
-------------------------------------	------------	--------------------

Die gewünschte Ausführung bitte ankreuzen! Die genannten Optionen können Aufpreise umfassen.

## SITZSCHALETIEFE

<input type="checkbox"/>	<b>S</b> MZ71000010	Standard (40 - 65 cm)
<input type="checkbox"/>	MZ71000020	Verkürzt durch Sitztiefe-Verkürzer <sup>1</sup> (30 - 55 cm)

1 Sitztiefe-Verkürzer für Benutzer mit kleineren Körpermaßen

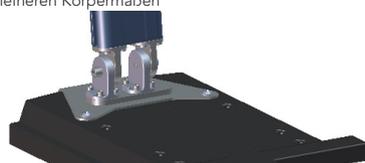

Sitztiefe-Verkürzer

## SITZHÖHE

### Sitzhöhsensäule

- |                          |                     |   |
|--------------------------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | MZ04000010          | Führungssäule 1 (30 ... 38 cm) <sup>1,2,3</sup> |
| <input type="checkbox"/> | <b>S</b> MZ04000020 | Führungssäule 2 (36 ... 44 cm)                  |
| <input type="checkbox"/> | MZ04000030          | Führungssäule 3 (44 ... 52 cm)                  |
| <input type="checkbox"/> | MZ04000040          | Führungssäule 4 (52 ... 60 cm) <sup>2</sup>     |

1 Maximale Sitzschalenbreite beträgt 50 cm, die Sitzwinkeleinstellung kann bei eckigen Sitzschalen und hinten gelegenen Schwerpunkt eingeschränkt sein

2 Die Radpositionierung in Bezug auf das Schultergelenk ist bei niedrigen und hohen Sitzhöhen nicht optimal

3 Bei der niedrigsten SH dieser Führungssäule können die Einstellung des Sitzwinkels nach vorn sowie die Bodenfreiheit unterhalb der Fußplatte eingeschränkt sein



Sitzhöhsensäule

## RÄDER

### Hinterrad

- |                          |                      |                     |
|--------------------------|----------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | MZ370180010          | 22" Vollgummireifen |
| <input type="checkbox"/> | <b>S</b> MZ370180020 | 24" Vollgummireifen |
| <input type="checkbox"/> | MZ370190010          | 22" Luftreifen      |
| <input type="checkbox"/> | MZ370190020          | 24" Luftreifen      |
| <input type="checkbox"/> | MZ370130010          | Greifreifenbezug    |
| <input type="checkbox"/> | MZ370130020          | Speichenschutz      |

## BEDINGUNGEN FÜR EINE CRASHTEST-SICHERE KOMBINATION:

Die Match hat die korrekte Kennzeichnung gemäß der Norm ISO7176-19:2008. Dieses Produkt ist Crashtest-sicher nach dieser Norm mit einem maximalen Benutzergewicht von 160 kg, wenn die Orthese und der Orthesenaufsatz die folgenden Bedingungen erfüllen:

- Das Gewicht der Orthese beträgt maximal 25 kg
- Die Orthese wird mit mindestens 4 M6/M8-Schrauben direkt mit der Sitzplatte in entsprechenden Befestigungslöchern des Match verbunden. Alle Verbindungen zwischen Orthese und Match haben mindestens die Qualitätsklasse 8.8 oder höher.
- Falls der Sitz und die Rückenlehne der Orthese nicht konstruktiv verbunden sind, wird die Rückenlehne an mindestens 2 Positionen mittels eines flachen Rückenbefestigungsadapters mit einem gegenseitigen Abstand von mindestens 250 mm bis 300 mm am Rückenrohr befestigt. Wenn diese Orthese Sitz und Rückenlehne miteinander verbindet, reicht 1 Position mittels flachen Rückenbefestigungsadapters
- An der Orthese angebrachtes Zubehör, wie z. B. eine Kopfstütze, muss während des Taxitransports entfernt und der Benutzer durch eine Anweisung darüber informiert werden. Falls dieser aus funktionalen Gründen nicht beschafft werden kann, muss er den oben genannten Zubehör entsprechen, insbesondere in Bezug auf Punkt 5.2.2 C von der Norm ISO7176-19:2008.'

Die Ausführung, Prüfung und Aufzeichnung der oben genannten Bedingungen liegen ausdrücklich in der Verantwortung der Person, die einen Match mit einer Orthese bereitstellt, es sei denn, es wurden mit der jeweiligen Partei zusätzliche Vereinbarungen getroffen.

### Match kombiniert mit

- |                          |             |  |
|--------------------------|-------------|--|
| <input type="checkbox"/> | MZ70000070  | Perteon Sitzschalenbefestigung           |
| <input type="checkbox"/> | MZ700000300 | Rehaform gebogene Sitzschalenbefestigung |
| <input type="checkbox"/> | MZ700000310 | Rehaform flache Sitzschalenbefestigung   |
| <input type="checkbox"/> | MZ700000080 | Befestigung für weitere Sitzschalen      |



# Produktübersicht

BEINSTÜTZEN		
<input type="checkbox"/>	MZ110000160	Zentrale Beinstütze ohne Wadenplatte und Fußplatte <sup>1</sup>
<input type="checkbox"/>	MZ110000170	Zentrale Beinstütze komplett <sup>1</sup>
<input type="checkbox"/>	MZ110000180	Unterschenkellänge Standard (UL - AHS = 29 - 45 cm)
<input type="checkbox"/>	MZ110000190	Unterschenkellänge Verlängert (UL - AHS = 40 - 57 cm)
<input type="checkbox"/>	MZ110000200	Seitenteile in Breite einstellbar für zentrale Beinstütze
<input type="checkbox"/>	MZ110000210	Einstellung Wadenplattentiefe für zentrale Beinstütze
<input type="checkbox"/>	MZ110000130	Winkelstellbare Beinstützen ohne Polsterung Fußplattenbreite 42 cm <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	MZ110000040	Winkelstellbare Beinstützen ohne Polsterung Fußplattenbreite 47 cm <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	MZ110000050	Winkelstellbare Beinstützen ohne Polsterung Fußplattenbreite 52 cm <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	MZ110000060	Winkelstellbare Beinstützen komplett Wadenplatte/Fußplattenbreite 42cm <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	MZ110000070	Winkelstellbare Beinstützen komplett Wadenplatte/Fußplattenbreite 47cm <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	MZ110000080	Winkelstellbare Beinstützen komplett Wadenplatte/Fußplattenbreite 52cm <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	MZ110000090	Auflagenhöhe Sitzschale Standard Adapter (AHS ≤ 7 cm)
<input type="checkbox"/>	MZ110000100	Auflagenhöhe Sitzschale Erhöhter Adapter (AHS > 7 cm)
<input type="checkbox"/>	MZ110000110	Unterschenkellänge Verkürzt (UL = 35 - 45 cm)
<input type="checkbox"/>	MZ110000120	Unterschenkellänge Standard (UL = 40 - 55 cm)
<input type="checkbox"/>	MZ110030160	Durchgehende Fußplatte Einklappbar nach: links <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/>	MZ110040160	Durchgehende Fußplatte Einklappbar nach: rechts <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/>	MZ110130130	Fersenriemen
<input type="checkbox"/>	MZ110130140	Laterale Kniepolsterung
<input type="checkbox"/>	MZ110030150	Kniewinkelbedienung mit Gasfederunterstützung links
<input type="checkbox"/>	MZ110040150	Kniewinkelbedienung mit Gasfederunterstützung rechts
<input type="checkbox"/>	MZ110000250	Winkelstellbare Beinstützen verstärkt ohne Polsterung 42 cm <sup>2,4,5</sup>
<input type="checkbox"/>	MZ110000260	Winkelstellbare Beinstützen verstärkt ohne Polsterung 47 cm <sup>2,4,5</sup>
<input type="checkbox"/>	MZ110000270	Winkelstellbare Beinstützen verstärkt ohne Polsterung 52 cm <sup>2,4,5</sup>
<input type="checkbox"/>	MZ110000280	Winkelstellbare Beinstützen verstärkt komplett 42 cm <sup>2,4,5</sup>
<input type="checkbox"/>	MZ110000290	Winkelstellbare Beinstützen verstärkt komplett 47 cm <sup>2,4,5</sup>
<input type="checkbox"/>	MZ110000300	Winkelstellbare Beinstützen verstärkt komplett 52 cm <sup>2,4,5</sup>
<input type="checkbox"/>	MZ110000090	Auflagenhöhe Sitzschale Standard Adapter (AHS ≤ 7 cm)
<input type="checkbox"/>	MZ110000100	Auflagenhöhe Sitzschale Erhöhter Adapter (AHS > 7 cm)
<input type="checkbox"/>	MZ110000110	Unterschenkellänge Verkürzt (UL = 35 - 45 cm)
<input type="checkbox"/>	MZ110000120	Unterschenkellänge Standard (UL = 40 - 55 cm)
<input type="checkbox"/>	MZ110030160	Durchgehende Fußplatte Einklappbar nach: links <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/>	MZ110040160	Durchgehende Fußplatte Einklappbar nach: rechts <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/>	MZ110130130	Fersenriemen
<input type="checkbox"/>	MZ110130140	Laterale Kniepolsterung

1 Einschl. Verlängerungsstück. Wählen Sie auch die richtige Unterschenkellänge  
 2 Einschl. Vorrücke. Wählen Sie auch die richtige Auflagenhöhe Sitzschale und Unterschenkellänge  
 3 Bei durchgehender Fußplatte, Kniewinkel der Beinstützen gleich halten  
 4 Das Wegschwenken der Winkelstellbare Beinstützen verstärkt kann in Kombination mit einigen Spurbreiten und Sitzhöhen begrenzt werden  
 5 Bei der Winkelstellbare Beinstützen verstärkt sind die Wadenplatten 1 Breitenmaß schmaler als die Fußplattenbreite. Die Breitenposition in Bezug auf die Winkelstellbare Beinstütze ist gleich



Zentrale Beinstütze



Winkelstellbare Beinstütze



Winkelstellbare Beinstütze verstärkt

## ARMLEHNEN (SITZSCHALEBREITE)

Seiten		
<input type="checkbox"/>	MZ090000010	Gebogenes Armlehnenrohr 1 + T-Stück 1 (17 ... 25 cm) (42 ... 59 cm)
<input type="checkbox"/>	MZ090000020	Gebogenes Armlehnenrohr 2 + T-Stück 2 (24 ... 40 cm) (47 ... 60 cm)
<input type="checkbox"/>	MZ090000030	Gebogenes Armlehnenrohr 1 + Winkelverstellung T-Stücke (17 ... 25 cm) (42 ... 59 cm)
<input type="checkbox"/>	MZ090000040	Gebogenes Armlehnenrohr 2 + Winkelverstellung T-Stücke (24 ... 40 cm) (47 ... 60 cm)

Armlehne		
<input type="checkbox"/>	MZ100030010	Gepolsterte Armlehne links
<input type="checkbox"/>	MZ100040010	Gepolsterte Armlehne rechts
<input type="checkbox"/>	MZ100030020	Breite Armlehne links
<input type="checkbox"/>	MZ100040020	Breite Armlehne rechts
<input type="checkbox"/>	MZ100030030	P-förmige Armlehne links
<input type="checkbox"/>	MZ100040030	P-förmige Armlehne rechts



# Produktübersicht

KOPFSTÜTZE		
<input type="checkbox"/>	MZ140000010	Standard-Kopfstützenbügel (ohne Polsterung)
<input type="checkbox"/>	MZ140000020	Standard-Kopfstütze, klein komplett
<input type="checkbox"/>	MZ140000030	Standard-Kopfstütze, komplett
<input type="checkbox"/>	MZ140000040	Snellius-Kopfstütze, komplett
<input type="checkbox"/>	MZ140000070	Zusätzliche Verbindung für Standard-Kopfstützenbügel <sup>1</sup>
<input type="checkbox"/>	MZ140000060	Snellius-Kopfstütze mit Edison-Bügel, komplett
<input type="checkbox"/>	MZ140000080	Frottee-Bezug für Snellius-Kopfstütze
<input type="checkbox"/>	MZ140000050	Edison-Kopfstützenbügel (ohne Polsterung)
1 Für die Vergrößerung des Kopfstützenbereichs		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Standard Kopfstütze klein</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Standard Kopfstütze</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Snellius-Kopfstütze mit Edison-Bügel</p> </div> </div>		
THERAPIETISCH		
<input type="checkbox"/>	MZ150000010	Plexiglas Therapietisch Breite 60 cm
<input type="checkbox"/>	MZ150000020	Plexiglas Therapietisch Breite 70 cm
<input type="checkbox"/>	MZ150000030	Ellbogenpolster
<input type="checkbox"/>	MZ150000040	Maßangefertigter Therapietisch <sup>1</sup>
1 Für die Bestellung eines maßangefertigten Therapietisches benutzen Sie bitte das Bestellformular individuelle Therapietische		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Plexiglas Therapietisch</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Plexiglas Therapietisch Ellenbogenpolster</p> </div> </div>		
ZUBEHÖR		
<input type="checkbox"/>	MZ160000010	Haltegurt
<input type="checkbox"/>	MZ160000020	Montagesystem für Haltegurt


**Hinweis:** Prüfen Sie immer, ob die gewählte Konfiguration für den Verwendungszweck und den Benutzer geeignet ist. Berücksichtigen Sie dies insbesondere bei der Auswahl und Einstellung der Fahreigenschaften, wie z. B. Schwerpunkt und Radstand und Spurweite. Informieren Sie den Benutzer gemäß der Bedienungsanleitung über die möglichen Risiken des Produkts.

Bei Abweichungen von den oben genannten Möglichkeiten verweisen wir Sie auf das ergänzende Bestellformular für Änderungen.



# Übersicht und Beschreibungen der Specials für Match

Die unten genannten Anpassungen sind nur Beispiele. Wenn Sie eine andere kundenspezifische Lösung realisieren möchten helfen wir Ihnen gerne, oder besuchen Sie unsere spezielle Website: <https://maatwerkportfolio.life-mobility.com/>

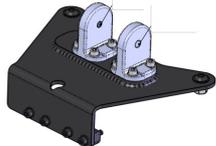Beschreibung für Beinstützen		Beschreibung für Hilfsantrieb	
<p><b>Zentrale Beinstütze mit Zahnscheiben zur Winkelverstellung</b> Für Kunden mit Krämpfen oder unbeabsichtigten Bewegungen in den Beinen, bei denen die Verbindung besonders stark sein muss oder einen Kniewinkel von 90° Grad benötigt.</p>		<p><b>Geräteträger in vorn</b> Für Kunden mit medizinischen Geräten um ihren Gesundheitszustand während des Tages optimal zu halten. Die Plattform vorne bietet viel Platz.</p>	
<p><b>Zentrale Beinstützverstellung mit 2 Fußplatten</b> Für Kunden, die eine individuelle Fußstütze benötigen (einstellbar pro Fuß)</p>		<p><b>Aura-Ladestation (individueller Standort)</b> Für Klienten und/oder Betreuer, die den Standard-Ladestecker nicht ausreichend erreichen können und ihn in ihrer selbst gewählten Position haben möchten.</p>	
<p><b>Erhöhter Adapter für Comfort (Solid) Beinauflage</b> Für Kunden mit einer (über) hohen Orthese, so dass die Beinstütze insgesamt höher als die Sitzplatte ansteigen muss. Maximal ausziehbar auf 18cm.</p>		<p><b>Positionierungshilfe Ladestecker</b> Schließen Sie das Aura-Ladegerät einfach an den Akku an. Der Pin-Schutzring gibt die Führung an, in welcher Position das Ladegerät angeschlossen werden soll.</p>	
<p><b>Abnehmbare Grundplatte (mittels Schnapper)</b> Für Kunden, die immer noch einen (unabhängigen) Transfer machen, bei dem die Fußplatte im Weg ist.</p>		<p><b>Sitztiefenverkürzer</b> Für Kunden, die eine kurze Sitztiefe erreichen möchten, um z.B. einen unabhängigen Transfer zu tätigen, dies aber in Kombination mit dem Aura-Zusatzantrieb wünschen.</p>	
<p><b>Einzelwinkelverstellung mittels Entriegelter Stift:</b> Für Kunden mit Spitzfuß. Stellung der Fußplatte individuell Anpassbar.</p>		<p><b>E-Antrieb @Ease</b> Für Nutzer, die noch selbstständig unterwegs sein wollen, aber körperlich nicht mehr in der Lage sind, selbst anzutreiben. Aber kognitiv genug, um sich mit einem Joystick zu bewegen.</p>	
<p><b>Fußstütze und Comfort-Beinauflage an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen</b> Für Kunden mit abweichender Beinlänge / Beinposition, die mit den Standardmaßen nicht auskommen.</p>		<p><b>Restfraktverstärker @Work</b> Für Kunden, die sich durch Greifreifenantrieb bewegen, dies aber nicht über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten.</p>	
Beschreibung für Armlehnen und Seiten		Beschreibung für Sitz- und Rückenverstellung	
<p><b>Armlehnausführung verstärkt</b> Für Kunden, die viel sitzen und/oder sich im Stuhl hochziehen und sich dann auf die Armlehne stützen. Extra stabil durch 2 Armlehnenrohre</p>		<p><b>Durchgehender Rückwinkel (30°Grad) mittels Gasdruckfedern</b> Für Kunden, die mehrmals am Tag in verschiedene Rückenwinkelpositionen gebracht werden müssen. (Achtung! Das ist keine Biomechanik)</p>	
<p><b>Armlehnen Abstand größer (vom Sitzrahmen) für breitere Sitzschalen</b> Für Kunden mit einer Orthese, bei der Sie mit den Standardmaßen nicht auskommen können und daher einen breiteren Armlehnenabstand benötigen.</p>		<p><b>Elektrische Neigungsverstellung durch Motor (auch für Aura)</b> Für Nutzer die sich mehrmals am Tag selbstständig kanteln möchten, dies aber nicht körperlich selbstständig tun können.</p>	
<p><b>Winkleverstellbare Schiebegriffe</b> Für Klienten mit unterschiedlichen Betreuungspersonen. Dank winkelverstellbarer Schiebegriffe kann dieser pro Person zusätzlich verstellt werden.</p>		<p><b>Sitzadapter für zusätzliche Sitzneigung</b> Für Kunden, die eine größere Sitzneigung benötigen.</p>	