

Morgan F / M / R



Met Morgan
zit je goed

Inspired by life

**Life & Mobility**

Met Morgan zit je goed

NEWTON

Maak kennis met onze meest complete familie elektrische rolstoelen. De Morgan F, M en R met voor-, midden- en achterwielaandrijving kenmerken zich door de grote modulariteit in positionerings- en ondersteuningsmogelijkheden. Zo is voor elke gebruiker een passende configuratie mogelijk.

Optimaal rijcomfort

De Morgan F, M en R bieden een comfortabele rijervaring dankzij de krachtige 4-polige motoren en de onafhankelijk instelbare vering. Oneffenheden in de ondergrond worden eenvoudig geabsorbeerd, waardoor het rijden buitengewoon comfortabel aanvoelt. Ook draagt de onafhankelijke vering bij aan een hoge mate van zitstabiliteit tijdens het rijden.

Voor-, midden- of achterwielaandrijving

Dankzij de uiterst compacte wielbasis zijn de Morgan F, M en R uitstekend manoeuvreerbaar in krappe ruimtes. De keuze van de aandrijving heeft invloed op het rijgedrag van de elektrische rolstoel onder wisselende omstandigheden. De ideale uitvoering is voor iedereen verschillend, afhankelijk van persoonlijke behoeften of omgevingsfactoren.

De midwiel aandrijving biedt een onovertroffen wendbaarheid en is uiterst intuïtief te besturen. Dat maakt de Morgan M ideaal voor zowel binnen- als buitengebruik. De Morgan F is compact en geschikt voor het nemen van hogere obstakels met het behoud van het optimale rijcomfort. Ook biedt de Morgan F ruimte voor het monteren van hulpapparatuur aan de achterzijde van de rolstoel. De Morgan R heeft de klassieke achterwielaandrijving, waardoor het zwaartepunt achter in de rolstoel ligt. Dat maakt de Morgan R het meest geschikt voor het rijden op hogere snelheden en bij langere afstanden.



Besturingssysteem en maatwerk

De Morgan serie is standaard uitgerust met R-Net. Een hoogwaardig besturingssysteem met tal van opties op het gebied van joystickbesturing en instellingen. Bovendien is het systeem eenvoudig te bedienen. Bij aanvullende functie-eisen bieden wij een totaaloplossing met ons portfolio speciale besturingen en maatwerk. Dit voeren wij volledig volgens de MDR-richtlijnen uit in ons Specialty Center in Kerkrade. Meer weten? Ga naar maatwerkportfolio.life-mobility.com.




Zitten in balans met Newton

Het geoptimaliseerde zitframe van de Morgan serie is een universeel systeem, dat zeer eenvoudig in breedte, diepte en hoogte verstelbaar is. Het beschikt over maximaal vier elektrische positioneringsfuncties en biedt een grote range aan opties en accessoires. Zo worden transfers of het juist positioneren van de cliënt aan tafel een stuk makkelijker.

Het zitframe wordt op de Morgan gecombineerd met het hoogwaardige Newton zitstelsel. Met de juiste zithoeken en individueel instelbare ondersteuning garandeert Newton een ontspannen zithouding voor de cliënt. Door het uitgebreide assortiment Newton Curve rugleuningen en Newton Contour zittingen bieden we voor een grote gebruikersgroep een passende ondersteuning.



Newton Curve rugleuningen

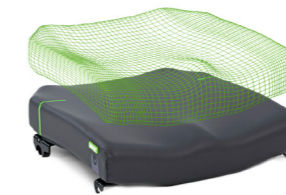

Newton Contour zittingen



Newton Curve 3 Deep

Bij een forse kyfotische curvatuur is de Newton Curve 3 Deep de juiste oplossing. Hiermee kan de cliënt zijn of haar rug dieper laten wegzakken in de rugleuning. De Curve 3 Deep is op de Morgan serie standaard uitvoerbaar in een rugbreedte die één maat smaller is dan de maatvoering van de zitting.

Het Newton zitstelsel vormt de basis binnen ons gehele manuele en elektrische productassortiment. Bij functionele achteruitgang van de cliënt vanuit een manuele rolstoel (Roxx of Canto Nxt) naar een elektrische rolstoel behoudt de cliënt zijn vertrouwde, ontspannen zithouding en blijft de Newton zitvisie gewaarborgd.



Scan de QR-code voor meer informatie over de revolutionaire zitvisie achter Newton.



Eigenschappen Morgan Serie

	MORGAN F	MORGAN M	MORGAN R
Totaalgewicht (kg)	203	165 - 187	182
Totaalgewicht zonder accu's (kg)	148	133	128
Maximaal gewicht inzittende (kg)	136	136	136
Totale lengte (incl. beensteunen) (cm)	113	119,5	120
Totale breedte (cm)	60-82,5	60-82,5	60-82,5
Totale hoogte (cm)	122	119	122
Zitbreedte (cm)	37 - 57	37 - 57	37 - 57
Zitdiepte (cm)	42 - 56	42 - 56	42 - 56
Zithoogte (zitplaat)	44	42	44
Wielgrootte (F/M/R)	14"/- /9"	8"/14"/6"	9"/- /14"
Actieradius (km)	Tot 40 (70Ah)	Tot 40 (70Ah)	Tot 44 (70Ah)
Maximum snelheid (km/h)	6-10	6-10	6-10
Max. hoogte obstakel (mm)	50	75	50
Draaicirkel (mm)	660	955	1040
Accu's	2x 50 Ah / 2x MPX70 (79Ah)	2x 50 Ah / 2x MPX70 (79Ah)	2x 50 Ah / 2x MPX70 (79Ah)
Besturing	R-Net	R-Net	R-Net
Crashtestsafe	Ja	Ja	Ja
Rugverstelling	Manueel / Elektrisch	Manueel / Elektrisch	Manueel / Elektrisch
Rughoekbereik	83-128° (bereik 45°)	83-128° (bereik 45°)	83-128° (bereik 45°)
Zithoekverstelling (kantel)	Manueel / Elektrisch	Manueel / Elektrisch	Manueel / Elektrisch
Zithoekbereik	0-50°	0-50°	0-50°
Beensteunverstelling	Manueel / Elektrisch	Manueel / Elektrisch	Manueel / Elektrisch
Beensteunbereik	90 - 165°	90 - 165°	90 - 165°
Hoogteverstelling	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Hoogte zitlift (cm)	0-30	0-30	0-30

Meer informatie kun je vinden op onze website of vraag onze productadviseur in jouw regio om passend advies!



Life & Mobility bv

PO Box 304
 NL - 7000 AH Doetinchem
 Logistiekweg 7
 Doetinchem

T +31 (0)314 328 000
 www.life-mobility.com
 info@life-mobility.com

