

# Scotmobielen



Samen kom  
je verder





# Samen kom je verder

Heerlijk een dagje winkelen met een vriendin? Of samen met een vriend de natuur in? En wat denkt u van een rondje door de stad? Met een scootmobiel van Life & Mobility is nee zeggen niet nodig. Ervaar die vrijheid, blij meedoen met wat er mogelijk is én met dat wat u eigenlijk nog zo graag wilt.

Life & Mobility vindt het belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk mobiel kan blijven. Dat is de visie die ons beweegt! Daarom werken wij samen met professionals die allemaal datzelfde doel hebben. Want wij realiseren ons: samen kom je verder. Productontwikkelaars die verstand hebben van comfortabel rijden en veiligheid in het verkeer. Maar ook met dealers die snappen wat u nodig heeft en uw vragen begrijpen. En daar zijn we trots op. Net als op onze scootmobielen, allemaal van Nederlandse makelij. Wij garanderen dat

onze scootmobielen voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen. We werken samen met geselecteerde dealers die net als wij geloven dat een scootmobiel meer is dan een vervoermiddel. Dat het een verrijking van uw leven is. Dat u daardoor samen met familie of vrienden op pad kunt gaan. Dealers die voor u een praktisch aanspreekpunt zijn. Samen met hen helpen we u op weg en dagen we u uit om meer uit het leven te halen. **Want samen kom je verder!**







# U staat bij ons centraal

Een positieve bijdrage leveren aan uw gevoel van vrijheid. Dat vinden we bij Life & Mobility belangrijk bij de ontwikkeling van onze scootmobielen. Door met u in gesprek te blijven kunnen we tegemoetkomen aan de verschillende eisen die aan een scootmobiel worden gesteld. Wilt u veilig boodschappen doen of er comfortabel op uitgaan in de natuur? Wij bieden een divers assortiment scootmobielen, ieder met zijn eigen voordelen. Onze dealers helpen u graag verder bij het maken van de juiste keuze!



## Solo: superieur rijcomfort

Ons topmodel met uitstekende vering voor het comfortabel rijden van langere afstanden. Volledig naar uw wensen op maat geleverd, dat is de Solo.

**Solo**, lees meer op pagina 8 - 9

**Solo Blue Diamond**, lees meer op pagina 10 - 11

**Solo Elegance**, lees meer op pagina 10 - 11



18 km/h



70 km

**INDEGO+**

veersysteem



## Presto: zelfverzekerd op pad

De Presto is een veilige en eerste klas scootmobiel met uitstekend rijcomfort. Zeer geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Met zijn moderne design en doordachte ontwerp kunt u zelfverzekerd op pad.

Lees meer op pagina 12 - 13



15 km/h



44 km

**INDEGO**

veersysteem



## Presto S: net even sneller

Heeft u een sportieve rijstijl en houdt u van een stijlvol design? Met een aantal extra opties, zoals de rubber impact bumpers en unieke dagrijverlichting, is de net iets snellere Presto S voor u een goede keuze.

Lees meer op pagina 14 - 15



17 km/h



44 km

**INDEGO**

veersysteem



## Vivo: klein formaat, groot plezier

De Vivo is eenvoudig te demonteren en kan dus makkelijk overal mee naartoe. De kleinste variant in ons assortiment biedt veel gebruiksgemak en volop rijplezier.

Lees meer op pagina 16 - 17



8 km/h



28 km

**INDEGO**

veersysteem







# Van Nederlandse makelij

Het begon allemaal in 1952. Het jaar waarin Anton Beumer met zijn bedrijf zijn eerste metalen rolstoelen verkocht. In de jaren die volgden schreef hij verschillende patenten op zijn naam. En innoveren zijn we blijven doen. Met de kennis uit 70 jaar ervaring maken we nu bij Life & Mobility een compleet assortiment mobiliteitsproducten. Waarbij we onszelf telkens weer de vraag stellen: 'wat kunnen we beter doen?'. Die vraag stellen we niet alleen intern, maar ook aan dealers en scootmobielrijders. Daarom maken we nu in Doetinchem de allerbeste scootmobielen. En dat doen we met maar één duidelijk doel voor ogen: dat u zo lang mogelijk mobiel blijft.



## “Geniet van elke veilige kilometer”



“Als productmanager kruip ik graag in de huid van een scootmobielrijder. Samen met mijn collega's ontdek ik wat u belangrijk vindt. Dat maakt mijn werk uitdagend, want ieder mens is anders. De een gebruikt een scootmobiel voor af en toe een dagje uit en de ander doet er de dagelijkse boodschappen mee. Toch heb ik geleerd dat er drie dingen zijn die iedereen belangrijk vindt: veiligheid, comfort en uitstraling. Daarom besteden we daar als vanzelfsprekend extra aandacht aan. Want zo weten wij zeker dat u volop geniet van elke veilige kilometer die u rijdt.”

**Chris de Niet**  
Productmanager



“Samen komen we echt verder”

“De allerbeste scootmobiel maak je niet alleen. Onze mensen hebben de juiste kennis en ervaring en onze zorgvuldig geselecteerde dealers weten precies wat u nodig heeft. Zij staan net als wij voor u klaar wanneer u een vraag heeft of ondersteuning nodig heeft. Wij leveren niet alleen een product, maar vooral een mobiliteitsoplossing, met de service en ondersteuning die daarbij horen. U kunt op ons rekenen, samen komen we echt verder!”

**Erwin Boersma**  
Retail manager

## “Mijn werk maakt het verschil”

“Wanneer je ouder wordt is mobiel zijn soms niet meer zo vanzelfsprekend. Door het maken van een scootmobiel kan ik het leven van iemand echt fijner maken. Een scootmobiel die helemaal past bij wat iemand nodig heeft. Dat geeft zo'n goed gevoel en is de reden dat ik met veel plezier naar mijn werk ga. Ik monteer een scootmobiel helemaal zelf en stel hem af op de wensen van de scootmobielrijder. Wanneer hij klaar is checkt mijn collega nog een keer of alle functionaliteiten in orde zijn. Als alles klopt, dan gaat hij naar de nieuwe eigenaar.”



**Rik Giezenaar**  
Medewerker operations



# Solo

## Superieur rijcomfort

Maak kennis met de Solo: een topklasse scootmobiel die u, door de vele opties en accessoires, volledig aan uw wensen kunt aanpassen. Het unieke, gepatenteerde INDEGO veersysteem dat soepel afrekenet met oneffenheden in de weg, is naar keuze sportief, comfortabel of extra geveerd

afgesteld. Dit maakt de Solo uitermate geschikt voor het rijden van lange afstanden. Ook voor mensen met pijnklachten, bijvoorbeeld veroorzaakt door rugproblemen of reuma, is de Solo een uitstekende keuze.



**INDEGO+**

veersysteem



18 km/h



70 km


 Kleurvarianten



Display met noodstopknop



Opvallende verlichting

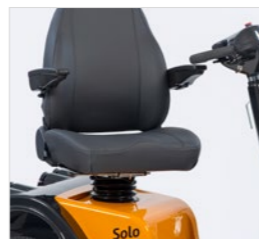

Comfortabele stoel



Duimbediening met drukknop (optie)



**SDS** SAFE DRIVING SOLUTIONS

## Veiligheid

- In de bochten houdt u volledige controle omdat de snelheid automatisch naar een veilig niveau wordt aangepast.
- Zonder het stuur los te laten kunt u de richtingaanwijzers bedienen. Ze schakelen automatisch uit na iedere bocht.
- In geval van nood stopt u de scootmobiel direct met de opvallende noodstopknop.
- De achterwielen veren onafhankelijk van elkaar. Samen met de unieke wielgrootte zorgt dit voor meer stabiliteit bij het raken van obstakels.

**EDS** ERGONOMIC DRIVING SOLUTIONS

## Comfortabel rijden

- De stoel, bediening, het stuur en rijgedrag zijn volledig af te stemmen op uw wensen en behoeften.
- De gepatenteerde INDEGO+ vering (naar keuze sportief, comfortabel of extra geveerd af te stellen) en speciale stoelvering zorgen voor de door u gewenste rijbeleving.
- Voor een minimale belasting van de handen kunt u op de rechte stukken de cruise control inschakelen.
- Royale been- en voetenruimte dankzij ergonomische vormgeving.

## Eigenschappen

- Verkrijgbaar in 3- en 4-wiel uitvoering.
- Instelbare snelheid tot 18 kilometer per uur.
- Maximale actieradius van 70 km\*.
- Hoge maximale belasting van 160 kg (200 kg optioneel).
- In hoogte verstelbare draaibare stoel met vering.
- Ook verkrijgbaar met de extra sterke Forza-motor voor het rijden in heuvelachtige gebieden.

\* Onder ideale omstandigheden





# Solo Blue Diamond en Solo Elegance

De speciale uitvoeringen van ons topmodel

## Solo Blue Diamond

Laat uw Solo stralen in de Blue Diamond uitvoering. De vertrouwde kwaliteit van de Solo, zoals de krachtige accu en extra hoog comfort-niveau, in een unieke blauwe uitvoering met 'oak brown' stoelbekleding met chic ruitpatroon, windscherm en verchromde spiegels.

## Solo Elegance


De Solo Elegance is de meest stijlvolle uitvoering van de Solo productrange, uitgerust met champagnekleurige kappen en dezelfde stoelbekleding, windscherm en verchromde spiegels als bij de Blue Diamond.




Beide varianten zijn ook verkrijgbaar in een 3-wiel uitvoering.




Opvallende verlichting

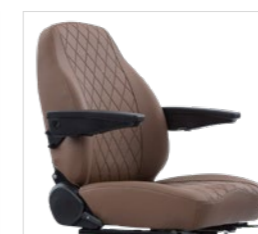

Oak brown stoelbekleding

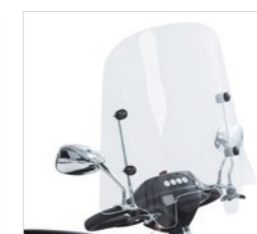

Windscherm

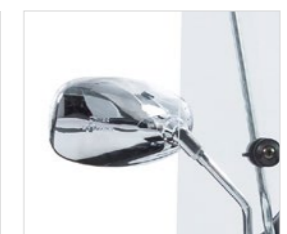

Verchromde spiegels



# Presto

## Zelfverzekerd op pad

Zoekt u een veilige en eersteklas scootmobiel met uitstekend rijcomfort dankzij het unieke INDEGO veersysteem? Dan zit u goed met de Presto. Met zijn kleine draaicirkel is hij zeer geschikt om zowel binnen als buiten te gebruiken. Bij het ontwerp hebben we goed nagedacht over alle veiligheidsaspecten rondom het rijden met een scootmobiel.

Door de led-verlichting bent u bijvoorbeeld goed zichtbaar in het verkeer. Met het overzichtelijke en slim ingerichte bedieningspaneel rijdt u moeiteloos weg. Even naar de winkel of langs familie of vrienden. Met zijn mooie design en doordachte ontwerp kunt u zelfverzekerd op pad!



**INDEGO**  
veersysteem



15 km/h



44 km


● ● ● Kleurvarianten



Digitaal display



Veel voertruimte

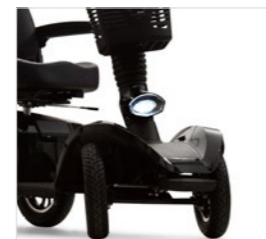

Meedraaiende koplamp



Led-verlichting



**SDS** SAFE DRIVING SOLUTIONS

## Veiligheid

- Om uw zichtbaarheid te vergroten zijn de knipperlichten hoog geplaatst en de achterlichten zo gepositioneerd dat ze ook vanaf de zijkant zichtbaar zijn.
- Meedraaiende koplamp met led-verlichting voor beter zicht in bochten.
- U kunt alle aandacht bij de weg houden doordat de bedieningsknoppen voelbare herkenningspunten hebben en binnen duimbereik liggen.
- In de bochten houdt u volledige controle omdat de snelheid automatisch naar een veilig niveau wordt aangepast.
- De richtingaanwijzers schakelen automatisch uit na een bocht en zijn veilig bedienbaar zonder het stuur los te hoeven laten.

**EDS** ERGONOMIC DRIVING SOLUTIONS

## Comfortabel rijden

- Uitstekend rijcomfort dankzij het unieke INDEGO veersysteem.
- Duidelijk leesbare pictogrammen en informatie dankzij een groot en overzichtelijk bedieningspaneel.
- Optimale zithouding door de veelzijdig instelbare comfortabele stoel: zithoogte, zitdiepte, rughoek, armsteunhoogte, breedte en hoek zijn vrij instelbaar.
- Royale been- en voetenruimte dankzij ergonomische vormgeving.

## Eigenschappen

- Instelbare snelheid tot 15 km/h.
- Maximale actieradius van 44 km\*.
- Kleine draaistraal van 160 cm.
- Hoge maximale belasting van 160 kg.
- Kunststof afneembare boodschappensmand.
- Inventieve tubeless banden, met lagere rolweerstand.

\* Onder ideale omstandigheden





# Presto S


## Net even sneller

Gaat u er graag op uit en houdt u hierbij van een beetje meer snelheid? Voor de Presto S, de sportievere en snellere uitvoering van de Presto, is dat geen punt. Door zijn kleine draaicirkel en sterke motor, rijdt u behendig en snel door de stad of over obstakels. De Presto S is voorzien van unieke dagrijverlichting,

waardoor u nog beter zichtbaar bent in het verkeer. Met veel ruimte voor uw voeten en de rubber impact bumpers komt u relaxed op uw bestemming aan. En met zijn strakke, zwarte design in mat en glans mag u absoluut gezien worden!

**INDEGO**  
veersysteem

  
17 km/h

  
44 km



**SDS** SAFE DRIVING SOLUTIONS

## Veiligheid

- Om uw zichtbaarheid te vergroten zijn de knipperlichten hoog geplaatst en de achterlichten zo gepositioneerd dat ze ook vanaf de zijkant zichtbaar zijn.
- De knipperlichten zijn voorzien van dagrijverlichting waardoor u nog beter zichtbaar kunt deelnemen in het verkeer.
- Meedraaiende koplamp met led-verlichting voor beter zicht in bochten.
- U kunt alle aandacht bij de weg houden doordat de bedieningsknoppen voelbare herkenningspunten hebben en binnen duimbereik liggen.
- In de bochten houdt u volledige controle omdat de snelheid automatisch naar een veilig niveau wordt aangepast.
- De richtingaanwijzers schakelen automatisch uit na een bocht en zijn veilig bedienbaar zonder het stuur los te hoeven laten.

**EDS** ERGONOMIC DRIVING SOLUTIONS


## Comfortabel rijden

- Uitstekend rijcomfort dankzij het unieke INDEGO veersysteem.
- Duidelijk leesbare pictogrammen en informatie dankzij een groot en overzichtelijk bedieningspaneel.
- Optimale zithouding door de veelzijdig instelbare comfortabele stoel: zithoogte, zitdiepte, rughoek, armsteunhoogte, breedte en hoek zijn vrij instelbaar.
- Royale been- en voetenruimte dankzij ergonomische vormgeving.

## Eigenschappen

- Instelbare snelheid tot 17 km/h.
- Maximale actieradius van 44 km\*.
- Kleine draaistraal van 160 cm.
- Hoge maximale belasting van 160 kg.
- Rubber impact bumpers rondom.
- Kunststof afneembare boodschappensmand.
- Inventieve tubeless banden, met lagere rolweerstand.


\* Onder ideale omstandigheden

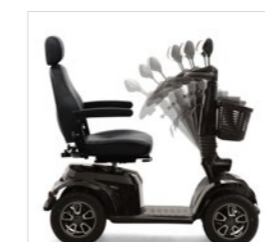


Verstelbaar stuur



Rubber impact bumpers

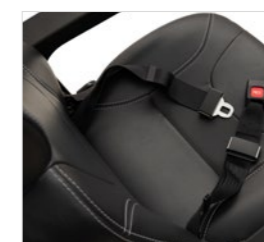

Ergonomische stoel

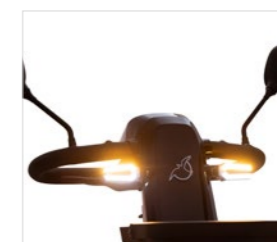

Dagrijverlichting



# Vivo

## Klein formaat, groot plezier

Elegant, comfortabel en veilig; dat is de Vivo. Deze compacte reisscooter is zonder gereedschap eenvoudig uit elkaar te halen en kan dus makkelijk overal mee naartoe. Vanwege de kleine draaicirkel is de Vivo erg wendbaar en door zijn brede luchtbanden ook uiterst stabiel.

De vering op de achteras en de brede stoel met voorgevormde armleggers, zorgen voor een uniek comfort. En met een actieradius tot 28 km kunt u ontspannen op pad. Geniet van de vrijheid die de Vivo u biedt.



**INDEGO**  
veersysteem



8 km/h




28 km

● ● ● Kleurvarianten



Eenvoudige bediening

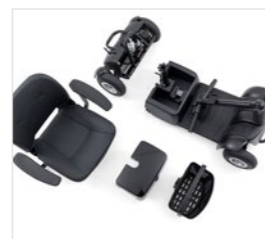

Demontabel



Uitstekende vering



Afneembare mand



**SDS** SAFE DRIVING SOLUTIONS

## Veiligheid

- Stabiliteit door grote brede luchtbanden en kantelbare as, waardoor de wielen beter contact houden met het wegdek.
- Hoge bodemvrijheid waardoor de Vivo gemakkelijk over obstakels rijdt.
- Het antirollback blokkeersysteem voorkomt onverwacht achteruit rijden op hellingen.
- Door de instelbare snelheidsstanden kan de maximale snelheid eenvoudig worden afgestemd op de omgeving.

**EDS** ERGONOMIC DRIVING SOLUTIONS

## Comfortabel rijden

- De traploze stuurhoekinstelling zorgt voor een optimale zithouding.
- De stoel kan naar wens in hoogte worden ingesteld.
- De stoel heeft een brede, diepe zitting en voorgevormde armleggers.
- De combinatie van een geveerde achteras en vier luchtbanden zorgt voor een comfortabele rijervaring.
- Royale beenruimte dankzij de ergonomische vormgeving.
- Perfect in krappe ruimtes, zoals winkels, door de kleine draaicirkel.

## Eigenschappen

- Instelbare snelheid tot 8 km/h.
- Maximale actieradius van 28 km\*.
- Hoge maximale belasting van 120 kg.
- Inclusief accu's (22Ah) en lader (3A).
- Standaard voorzien van antiekiepwiltjes.
- Magneetsleutel, met verbeterd ontwerp.
- Kunststofmand met handvat, voorzien van quick-release en extra verstevigde ophanging.
- Demontabel in 5 onderdelen voor gemakkelijk vervoer en berging (het zwaarste onderdeel weegt 20,5 kg).

\* Onder ideale omstandigheden





# Veiligheid is de standaard

Onze scootmobielen zijn veilig en doordacht ontworpen. Dat blijft niet bij mooie woorden. Wij kopen materialen in van de hoogste kwaliteit. Samen met onze productontwikkelaars ontwikkelden we onze Safe Driving Solutions (SDS): een pakket met verschillende veiligheidsvoorzieningen, zoals meer stabiliteit en beter zicht. Het merendeel van onze modellen heeft vier wielen; dat rijdt niet alleen comfortabel maar biedt vooral stabiliteit.

De Solo, Presto en Presto S zijn uitgevoerd met led-verlichting. Dat zorgt voor beter zicht en voor een

grotere zichtbaarheid van uzelf in het verkeer. Ook is het grote en overzichtelijke display makkelijk met één hand te bedienen. Zo kunt u zich volledig op de weg concentreren. Onze Solo is standaard uitgevoerd met een noodstopknop om veilig te kunnen stoppen en de controle over de scootmobiel te behouden. Een bocht te snel of scherp genomen? De snelheidscorrectie van de Solo, Presto en Presto S herstelt een inschattingfout en corrigeert automatisch de snelheid in bochten. De richtingaanwijzers schakelen na de bocht automatisch uit.

**SDS** SAFE DRIVING SOLUTIONS


	Solo Solo Blue Diamond Solo Elegance	Presto Presto S	Vivo
Bediening richtingaanwijzers binnen handbereik van gas- / remfunctie	●	●	
Instelbare / programmeerbare snelheidsstanden	●	●	●
Noodstopknop	●		
Auto-stop richtingaanwijzers	●	●	
Snelheidscorrectie in bochten	●	●	
Grote wielen om veilig over obstakels te rijden	●	●	
Meedraaiende verlichting		●	
INDEGO+ veersysteem	●		
INDEGO veersysteem		●	●
Stabiliteit door grote brede luchtbanden	●	●	●
Kantelbare vooras, zodat wielen op het wegdek blijven	●	●	●
Hoge bodemvrijheid	●	●	●
Antirollback blokkeersysteem	●	●	●
Snelheid snel aan te passen aan voetgangersgebied	●	●	●
Tactiele herkenning van de bedieningsknoppen	●	●	●



Meedraaiende koplamp (Presto, Presto S)



Grote wielen (Solo, Presto, Presto S)

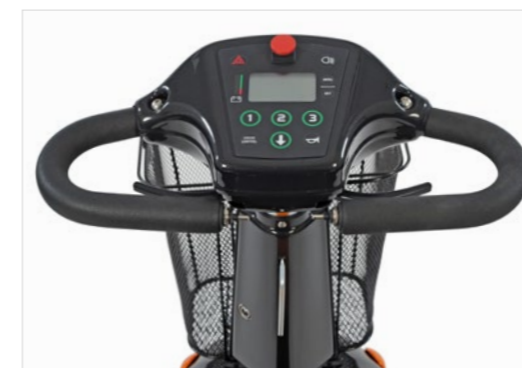

Display met noodstopknop (Solo)



Opvallende led-verlichting (Presto, Presto S)





# Altijd comfortabel rijden

Comfortabel rijden, daar komt van alles bij kijken. Daarom hebben wij ergo- en fysiotherapeuten in huis. Mensen die als geen ander weten hoe het lichaam werkt. Zij dachten mee over onze Ergonomic Driving Solutions (EDS). Een pakket met ergonomische oplossingen die er voor zorgen dat onze scootmobielen helemaal op uw lichaam zijn af te stellen. Want een mooi design is fijn,

maar comfortabel rijden is voor iedere scootmobielrijder nog veel belangrijker. Het INDEGO veersysteem levert een belangrijke bijdrage aan een comfortabele rit. Naar iedere hobbel in het wegdek omkijken hoeft niet, grote kans dat u die niet eens merkt. De verrassend royale beenruimte geeft vrijheid en draagt daardoor bij aan extra comfort, vooral bij lange ritten.



	Solo Solo Blue Diamond Solo Elegance	Presto Presto S	Vivo
INDEGO+ veersysteem	●		
INDEGO veersysteem		●	●
Gebruikersspecifieke stoel, keuze uit: formaat, zachtheid en ondersteuning	●		
Traploze stuurhoekinstelling	●	●	●
Stuurhoogte instelling	●		
Gebruikersspecifieke vering	●		
Stoelvering	●		
(Traploos) Instelbare zithoogte	●	●	●
Verstelbare lumbaalsteun	●		
Royale beenruimte	●	●	●
Cruise control	●		



# Het INDEGO veersysteem

Het menselijk lichaam is niet goed bestand tegen zijwaartse belasting. Onze ruggengraat is in staat naar voren en achteren te bewegen, maar in zijwaartse richting zijn we veel minder soepel en zijn schokken al snel hinderlijk. Om het lichaam in zijwaartse richting zo min mogelijk te belasten, zijn onze Solo, Presto en Presto S uitgerust met het unieke gepatenteerde INDEGO veersysteem. De Vivo heeft een eigen variant waarbij deze unieke vering bij de voorwielen is geïntegreerd.

Het INDEGO veersysteem rekt soepel af met oneffenheden in de weg en is gebaseerd op rubber. Dit heeft direct een dempende werking, ongeacht de belasting door de gebruiker. Bij rubber hoeft namelijk geen aanvangskracht overwonnen te worden zoals bij een spiraalvering. Uitstekend comfort dus. Zo kunt u zich volledig focussen op het verkeer.

## INDEGO

### Stabiliteit

Minimaliseert hinderlijke schokken door verminderde zijbelasting.

### Onafhankelijke vering

De wielen veren onafhankelijk van het frame.

### Veiligheid bij obstakels

Wegligging blijft stabiel, ook bij drempels of andere obstakels.

### Rijcomfort


Comfortabel rijden dankzij de natuurlijk dempende eigenschappen van de rubberen vering.

### Rechte rugkolom

Een rechte houding ondanks oneffenheden in het wegdek.

### Geschikt voor ruw terrein

Maakt ook minder toegankelijk terrein makkelijker berijdbaar.

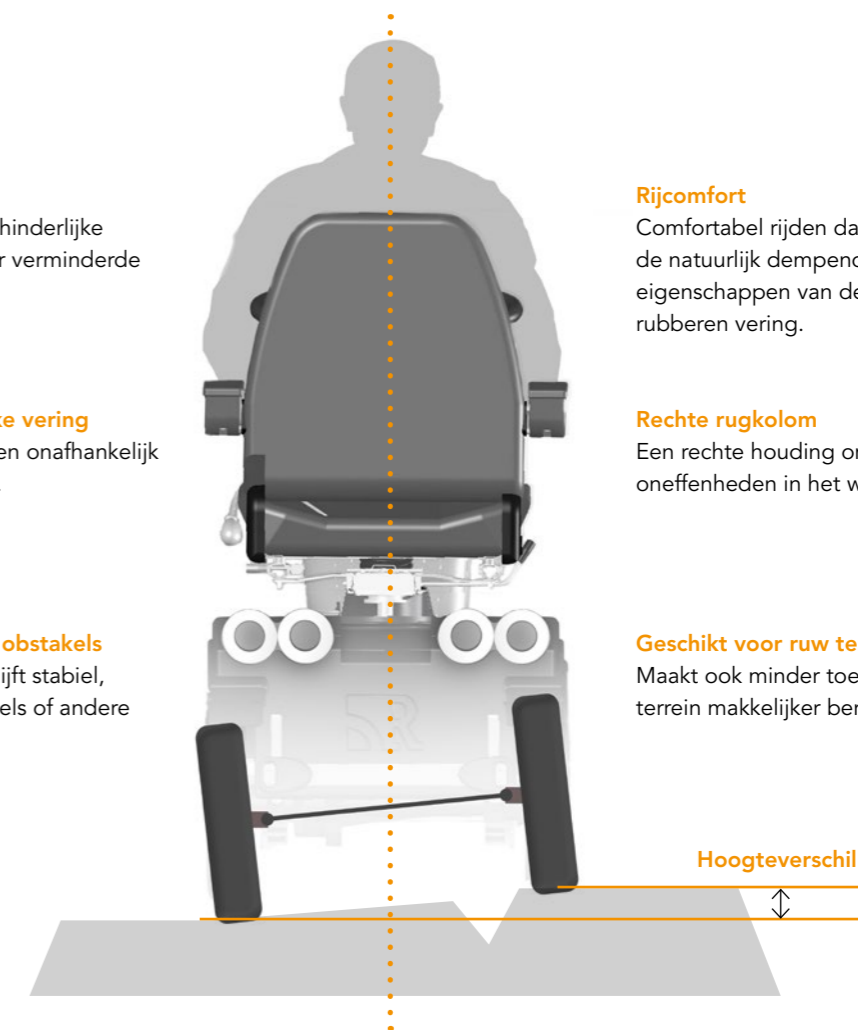





# Productassortiment



## Eigenschappen

Solo 4-wiel

Solo Blue Diamond

Solo Elegance

Solo 3-wiel\*\*

Presto

Presto S

Vivo

Hoogte scootmobiel	120 cm	120 cm	120 cm
Lengte scootmobiel	140 cm	140 cm	140 cm
Breedte scootmobiel	64 cm	64 cm	64 cm
Hoogte voetplateau	17 cm	17 cm	17 cm
Zitbreedte	48 cm	48 cm	48 cm
Zitdiepte	44 cm	44 cm	44 cm
Zithoogte t.o.v. plateau	45 - 53 cm	45 - 53 cm	45 - 53 cm
Maximum snelheid	18 km/h	18 km/h	18 km/h
Actieradius	35 / 45 / 65 km*	35 / 45 / 65 km*	35 / 45 / 65 km*
Accu (Gel)	60 / 73 / 97 Ah	60 / 73 / 97 Ah	60 / 73 / 97 Ah
Lader	6A / 24V, 8A / 24V, 12A / 24V	6A / 24V, 8A / 24V, 12A / 24V	6A / 24V, 8A / 24V, 12A / 24V
Totaal gewicht (excl. accu's)	105 kg	105 kg	105 kg
Maximaal draagvermogen	160 kg (optie: 200 kg)	160 kg (optie: 200 kg)	160 kg (optie: 200 kg)
Draaistraal	167 cm	167 cm	167 cm
Maximale hellingshoek	10°	10°	10°
Wielmaat	3.00 - 16"	3.00 - 16"	3.00 - 16"
Voldoet aan	EN 12184 klasse C	EN 12184 klasse C	EN 12184 klasse C
Kleuren	Oranje / Zilver	Blauw	Champagne

120 cm	114 cm	114 cm	92 cm
140 cm	134 cm	138 cm	108 cm
64 cm	65 cm	65 cm	58 cm
17 cm	19 cm	19 cm	9 cm
48 cm	51 cm	51 cm	46 cm
44 cm	44 cm	44 cm	45 cm
45 - 53 cm	47 - 54,5 cm	47 - 54,5 cm	40 / 42,5 / 45 / 47,5 cm
18 km/h	15 km/h	17 km/h	8 km/h
40 / 50 / 70 km*	29 / 35 / 44 km*	29 / 35 / 44 km*	28 km*
60 / 73 / 97 Ah	50 / 60 / 73 Ah	50 / 60 / 73 Ah	24V / 22 Ah
6A / 24V, 8A / 24V, 12A / 24V	6A / 24V, 8A / 24V	6A / 24V, 8A / 24V	3A/24V
96 kg	87 kg	87 kg	63 kg
160 kg (optie: 200 kg)	160 kg	160 kg	120 kg
140 cm	160 cm	160 cm	118,5 cm
10°	10°	10°	6°
3.00 - 16"	3.00 - 16"	3.00 - 16"	24 x 7,5 cm
EN 12184 klasse C	EN 12184 klasse C	EN 12184 klasse C	EN 12184 klasse A
Oranje / Zilver	Geel / Rood / Zilver	Zwart	Zwart / Zilver / Blauw

\* Afhankelijk van de ingestelde snelheid, buitentemperatuur, gewicht gebruiker, bandenspanning, etc.

\*\* Ook verkrijgbaar in Blue Diamond of Elegance uitvoering.



**Life & Mobility bv**

PO Box 304  
NL - 7000 AH Doetinchem  
Logistiekweg 7  
Doetinchem

T +31 (0)314 328 000  
[www.life-mobility.com](http://www.life-mobility.com)  
[info@life-mobility.com](mailto:info@life-mobility.com)

Uw Life & Mobility scootmobiel dealer



Inspired by life