

EVO

Lectus



Comfortabel en  
veilig op weg

Inspired by life

Life & Mobility

## EVO Lectus


Met de EVO Lectus kan de gebruiker weer alles doen wat hij echt belangrijk vindt! De stabiele en moderne EVO Lectus heeft voorwielaandrijving en een comfortabele individuele ondersteuning door het Lectus-zitsysteem.

De EVO Lectus biedt zowel buiten als binnen de meest optimale gebruikerservaring. Dankzij de grote actieradius en de krachtige motor zijn zelfs moeilijke obstakels geen probleem. De biomechanische rug- en voetsteunen en de opklapbare armsteunen maken transfers voor rolstoelgebruikers makkelijker. Bovendien kan de rolstoel als basis voor de meest uiteenlopende zitortheses gebruikt worden. Ook de vele mogelijkheden in speciale besturingen geven de eindgebruiker meer mogelijkheden.

De EVO Lectus is een premium elektrische rolstoel met een moderne look die zelfs onderscheiden is met een IF Design award. Naast het design is tijdens de ontwikkeling ook nagedacht over de behoeften van alle betrokkenen, zoals familieleden van de gebruikers, zorgmedewerkers en servicemonteurs.

### Kortom:

- Maximale hoogteverstelling zitting 40 cm
- Zeer grote actieradius
- Breed scala aan zitaanpassingen
- Winnaar van de IF DESIGN AWARD

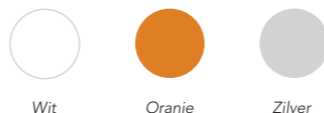

## karma

### Specialty Center voor custom-made oplossingen

Life & Mobility wil positief bijdragen aan een optimale mobiliteit en maximale zelfredzaamheid van mensen met een beperking. Door de vele standaard instelmogelijkheden is de EVO Lectus heel geschikt als oplossing voor diverse beperkingen en behoeften.

Toch komt het voor dat de standaard mogelijkheden niet voldoen. Wij zorgen daarom ook voor custom-made aanpassingen aan onze elektrische rolstoelen. Indien gewenst, zullen onze adviseurs samen met u de specifieke klantbehoefte duidelijk in kaart brengen. Vervolgens wordt dit vertaald naar

een passende technische oplossing. Denk daarbij aan speciale besturing, aanvullende ondersteuning of zelfs een elektrische instaphulp.

Deze klant-specifieke aanpassingen worden ontworpen en gebouwd in ons Specialty Center in Kerkrade (NL). Hier zijn elke dag een aantal specialisten aan het werk om de specifieke behoeften van onze klanten om te zetten naar de juiste technische oplossingen. De veiligheid en betrouwbaarheid van iedere custom-made elektrische rolstoel wordt gewaarborgd door een vastgelegde risicoanalyse te doorlopen voordat de rolstoel wordt vrijgegeven en uitgeleverd.



### STANDAARD:

- Zithoogteverstelling 40 cm
- In hoogte verstelbare armleuningen
- Beensteunen met lengtecompensatie
- Geïntegreerd 4-punts taxihaken (ISO 7176/19)

### OPTIES:

- Montagesysteem voor Dahl-docking station
- 3D instelbare hoofdsteun
- Individueel instelbare rompelotten en heupsteunen
- Wegzwenkbaar werkblad met omkeerbare stuurkast
- Groot aanbod speciale besturingen
- R-Net besturing mogelijk

### EIGENSCHAPPEN

Aandrijving	Voorwiel	Maximale snelheid	12,5 km/h
Totale lengte	120 cm	Actieradius	30 - 45 km
Totale breedte	62 cm	Accu's	70 Ah / 85 Ah
Zitbreedte	42 - 62 cm	Lader	8A/24V, 12A/24V
Zitdiepte	40 - 60 cm	Besturing	VR2 / R-net
Zithoogte (incl. zitting)	46 - 86 cm	Totale gewicht (incl. accu's)	165 kg
Zittinghoek	0 - 50°	Maximaal gewicht inzittende	140 kg kg
Zithoekverstelling	Elektrisch	Draaicirkel	100 cm
Rugleuninghoek	85 - 180°	Voldoet aan	EN 12184 - 2008 / ISO 7176-19
Rughoekverstelling	Handmatig / Elektrisch	Crashtest safe)	Ja
LT-vlak hoogtepositie	??	Kleur bekapping	Antraciet / Oranje / Wit



Zithoekbereik: 0° - 50°



Zithoogte: 55 - 95cm



Rughoek en Beensteunverstelling




Ligpositie

Voor een overzicht van passende zitortheses download het productoverzicht of de prijslijst op [www.life-mobility.com](http://www.life-mobility.com)

**Life & Mobility bv**

PO Box 304  
NL - 7000 AH Doetinchem  
Logistiekweg 7  
Doetinchem

T +31 (0)314 328 000  
[www.life-mobility.com](http://www.life-mobility.com)  
[info@life-mobility.com](mailto:info@life-mobility.com)

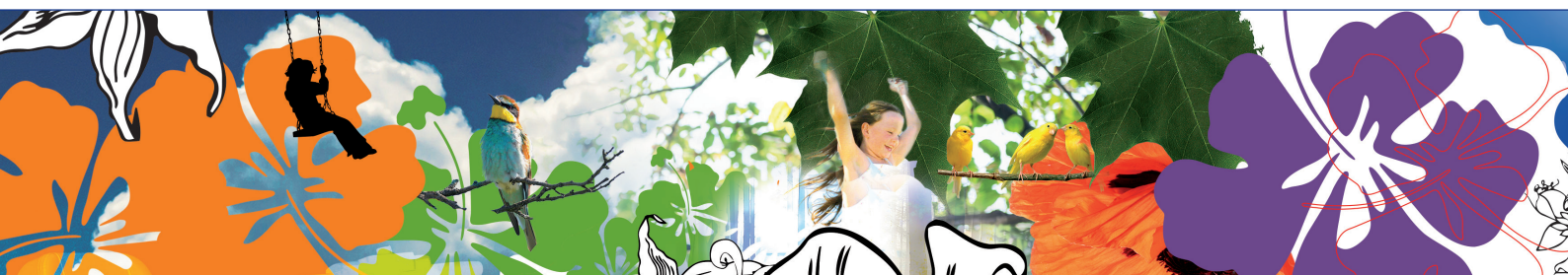

Inspired by life