



Wat & Waarom

Manuele mobiliteit

Productoptimalisering en -uitbreiding: Zijkant Roxx

Wat:

1. Productoptimalisering: opnameblokje Roxx zijkant.
2. Nieuwe optie op de Roxx: verlengde zijkant.

Wanneer:

Per 1 januari 2016.


Waarom:

1. De uitneembaarheid en stabiliteit is geoptimaliseerd. De uitneembare armlegger wordt standaard vastgezet, waardoor de stabiliteit van de armlegger toeneemt. De armlegger kan eenvoudig weer uitneembaar gemaakt worden door het uitdraaien van 1 boutje.
Voor de opklapbare armlegger geldt dat deze optioneel vastgezet kan worden, deze zal standaard opklapbaar blijven.
2. Kleding kan niet meer tegen de band aankomen, benen worden zijwaarts ondersteund.



Hoe:

1. Aanpassing van het opnameblokje met een extra fixeermogelijkheid.

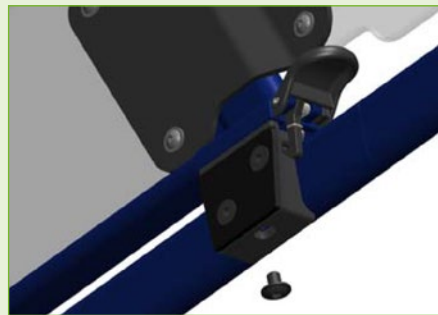

2. Extra zijschildje dat optioneel aan de voorzijde van het zijkantje gemonteerd kan worden.



Optie: Contour zitting op Mixx

Wat:

Uitbreiding van zitondersteuningsmogelijkheden op de Mixx d.m.v. Contour zitting als extra optie.

Wanneer:

Per 1 januari 2016.

Waarom:

Om de doelgroep van de Mixx een bredere keuze qua zittingen aan te kunnen bieden en vooral de behoeftes van het kunnen gaan verzitten en de gewenste lage zithoogte te kunnen bieden is de Contour zitting vanaf nu ook kiesbaar als optie op de Mixx.





Optie: Bijrem op Match Duwwagen

Wat:

Nieuwe optie op de Match Duwwagen.

Wanneer:

Coming soon!

Waarom:

Zodat je de Match bij kunt remmen als je een helling afloopt en hierdoor meer controle over de stoel houdt.

Hoe:

Twee extra knijpers op de duwhandvatten van de Match, duidelijk herkenbaar door de nieuwe knijperindicatie die aangeeft welke hendel waarvoor bedoeld is.



match

Product optimalisering

Introductie nieuwe gipsbeensteun als optie op de Roxx, Canto Nxt, Mixx, Rollit en Plus

Wat:

Productoptimalisering van de gipsbeensteun.

Wanneer:

Januari 2016.

Waarom:

Om gebruikers die kortdurend ondersteuning van hun gipsbeen nodig hebben, nog beter individueel te kunnen ondersteunen. Instelbaarheid is vergroot, vernieuwde vormgeving en eenvoudig om te bouwen van links naar rechts en vice versa.

Hoe:

- Eenvoudig in hoek instelbaar.
- In hoogte instelbaar zodat aansluiting met verschillende zittingen mogelijk is.
- Instelbare onderbeenlengte.
- Gipsbeensteun is naar de zijkant wegzenkbaar d.m.v. de adapter comfort beensteun.
- Materiaal is extra goed te reinigen, o.a. geseald i.p.v. gestikt.
- Spitsvoetkussentje (zacht korrelatex kussen) ter voorkoming van spitsvoet.



Introductie nieuwe amputatiebeensteun als optie op de Roxx, Canto Nxt, Mixx, Rollit en Plus

Wat:

Productoptimalisering van de amputatiebeensteun.

Wanneer:

Coming soon!

Waarom:

Om gebruikers nog betere ondersteuning en drukverdeling te bieden. Instelbaarheid is vergroot, vernieuwde vormgeving en eenvoudig om te bouwen van links naar rechts en vice versa..

Hoe:

- Eenvoudig in hoek instelbaar.
- In hoogte instelbaar zodat aansluiting met verschillende zittingen mogelijk is.
- De amputatiesteun is verkrijgbaar in korte en lange uitvoering.
- Amputatiesteun is naar de zijkant wegzenkbaar d.m.v. de adapter comfort beensteun.
- Amputatiesteun is gemaakt van hetzelfde materiaal als de Kelvin zitelementen (korrel-latex vulling) voor een goede drukverdeling en stabiliteit.





Herkenbaarheid verstelhendel zijwangen Tracix & Invito rugleuning

Wat:

Verstelhendel zijwangen in herkenbaar groen.

Wanneer:

Per januari 2016.

Waarom:

Om de verstelhendel van de zijwangen beter zichtbaar en vindbaar te maken is deze vanaf januari groen gecoat.



Uit assortiment

• Roxx:

- Oude Roxx Zelfrijder & Trippel (Roxx – The Original)
- Los leverbare onderdelen per 1 januari 2016: zo lang de voorraad strekt.
- Los leverbare onderdelen per 1 juli 2016: uit assortiment.
- Uitgezonderd: de kunststof zijschildjes en het zittingbeslag.

• Plus Duwwagen

• Amara

Los leverbare onderdelen Amara

• Rollatorhouder op Primo, Mezzo en Solo

Per 1 januari 2016 vervalt de rollatorhouder als optie op de Primo, Mezzo en Solo.

• Per 1 januari 2016 niet meer kiesbaar als optie op stoelen.

- Spanbandenrugleuning Roxx
- Contour Gel zitting
- Bohr rugleuning
- Geprofileerde rugleuning

Als los onderdeel leverbaar zo lang de voorraad strekt.

Optie: Standaard (onbedrukte) spaakbeschermers

• Rollit:

Standaard spaakbeschermers nu ook kiesbaar op de Rollit.

Langere levertijd:

- Traagschuimzitting ZD 56cm Roxx (alle ZB)
 - Comform Xtra/Comfit rug Plus
- Vanaf heden 14 werkdagen levertijd.